

WIDEX DREAM™

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM™-FAMILIEN

D-PA-modell
Telefon i øregangen



WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

HØREAPPARATET

(Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.)

Høreapparat-serien:

PROGRAMMER

Master

Musikk

TV

Komfort

Bakoverfokus

Telefon

Zen

SPESIALPROGRAMMER

Master + Zen

Master + Telefon

Master + Bakoverfokus

SMARTTOGGLE-PROGRAMMER

Zen+

MERK

Les denne brosjyren samt brosjyren "Øreproppsett for Widex-høreapparat" nøye før du begynner å bruke høreapparatet.

INNHold

HØREAPPARATET.....	6
Velkommen.....	6
En oversikt over høreapparatet.....	6
Viktig sikkerhetsinformasjon.....	7
HØREAPPARATET.....	9
Indikasjoner for bruk.....	9
Tiltentkt bruk.....	9
Batteriet.....	9
Varsel om lite batteri.....	10
Bytte batteri.....	10
Lydsignaler.....	11
Mistet høreapparat-partner	12
Forskjellen mellom venstre og høyre apparat.....	12
Slå høreapparatet av og på.....	12
Sette inn og ta ut høreapparatet.....	13
Lydjustering.....	13
Programmer.....	14
Zen-programmet.....	16
Bytte programmer.....	16
Bruke en telefon med høreapparat.....	16

RENGJØRING	17
Verktøy.....	17
Rengjøring.....	17
TILBEHØR	19
FEILSØKING	20
INFORMASJON OM SPESIELLE PÅBUD	22
EU-direktiver.....	22
Direktiv 2014/53/EU.....	22
Informasjon om kassering.....	22
FCC- og IC-erklæringer.....	22
SYMBOLER	26

HØREAPPARATET

Velkommen

Gratulerer med nytt høreapparat


Bruk høreapparatet regelmessig, selv om det tar tid å bli vant til. Bruker du høreapparatet uregelmessig, vil du ikke få oppleve alle fordelene det kan gi deg.

MERK

Høreapparatet og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn det som er vist i denne brosjyren. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre eventuelle endringer vi mener er nødvendige.

En oversikt over høreapparatet

Illustrasjonen viser høreapparatet uten øreproppsettet. Se øreproppsettets håndbok for ytterligere informasjon. Øreproppsettet består av en ledning og en ørepropp, og det er den delen av høreapparatet som skal være inne i øret.

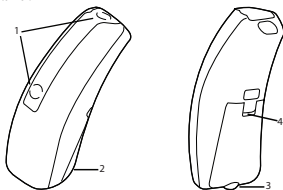

1. Mikrofon-åpninger
2. Batteriholder (av/på-funksjon)
3. Neglespor
4. Markering for høyre/venstre.
Blått angir venstre høreapparat,
mens rødt angir høyre høreapparat.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les disse sidene nøye før du begynner å bruke høreapparatet.



Høreapparater og batterier kan være farlige hvis de svelges. Svelging eller feilaktig bruk kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. Ved svelging, kontakt umiddelbart ditt lokale nødnummer eller sykehus.



Ta høreapparatet ut når du ikke bruker det. Da får øregangen ventilasjon, noe som kan forhindre ørebetennelse.



Kontakt legen din eller hørselsspesialisten umiddelbart hvis du tror du kan ha fått ørebetennelse eller en allergisk reaksjon.



Ta kontakt med hørselsspesialisten hvis plasseringen av høreapparatet ikke kjennes behagelig, eller hvis det ikke passer skikkelig, slik at det oppstår irritasjon og rødhet eller lignende.



Ta ut høreapparatet før du dusjer, svømmer eller fønner håret.



Høreapparatet skal ikke være satt inn når du tar på parfyme, spray, gelé, lotion eller krem.



Høreapparatet skal ikke tørkes i mikrobølgeovn. Da blir det ødelagt.



Du må aldri bruke et annet høreapparat enn ditt eget, og du skal heller aldri la andre bruke ditt. Det kan skade hørselen.



Høreapparatet skal aldri brukes i miljøer der det kan være eksplosive gasser, f.eks. i gruver o.l.



Høreapparat, deler, tilbehør og batterier må oppbevares utilgjengelig for barn og psykisk funksjonshemmede.



Prøv aldri å åpne eller reparere høreapparatet selv. Ta kontakt med hørselsspesialisten hvis høreapparatet må repareres.



Høreapparatet inneholder radiokommunikasjonsteknologi. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene der du bruker det. Hvis det foreligger begrensninger, må du ta forholdsregler for å overholde dem.



Enheten er laget for å oppfylle internasjonale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Det kan imidlertid ikke utelukkes at det kan oppstå interferens med annet elektrisk utstyr. Hvis du opplever interferens, må du holde deg på avstand fra annet elektrisk utstyr.



Høreapparatet må ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller høy luftfuktighet. Tørk det raskt hvis det blir vått, eller hvis du svetter mye.



Vær oppmerksom på at det å strømføre lyd til høreapparater med høyt volum kan hindre deg i å høre andre viktige lyder som alarmer og trafikkstøy. I slike situasjoner må du sørge for å holde volumet på lyden som streames på et passende nivå.

Høreapparatet skal oppbevares og transporteres innenfor temperatur- og fuktighetsområder på $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $+55\text{ }^{\circ}\text{C}$ og 10 % – 95 % rel. fuktighet.

Høreapparatet er konstruert for å operere innenfor områder for temperatur, fuktighet og atmosfærisk trykk på $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ til $50\text{ }^{\circ}\text{C}$, 10 % til 95 % rel. fuktighet og 750 til 1060 mBar.

Du kan finne tekniske datablad og ytterligere informasjon om høreapparatet ditt på <https://global.widex.com>.

HØREAPPARATET

Indikasjoner for bruk

Høreapparatet skal brukes av personer med mildt hørselstap (16 dB HL) til stort hørselstap (opptil 85 dB HL), samt alle hørselstapskonfigurasjoner.

Høreapparatet skal programmeres av en hørselsspesialist (audiograf, høreapparatspesialist, ØNH-lege) med spesialisering innen hørselsrehabilitering.

Tiltenkt bruk

Høreapparatet skal fungere som et luftledende forsterkningsapparat som skal brukes i hverdagslige lyttesituasjoner. Høreapparatene kan være utstyrt med et Zen-program som skal tilrettelegge for en avslappende lydbakgrunn (dvs. musikk/støykilde) for voksne som ønsker en slik lydbakgrunn i stille omgivelser.

Batteriet

Bruk et **sink-luft-batteri av type 10**-batteri til høreapparatet.

Bruk alltid et nytt batteri som er helt likt den typen som er anbefalt av hørselsspesialisten.

MERK

Kontroller at batteriet er helt rent og fint før du setter det inn i høreapparatet. Ellers vil kanskje ikke høreapparatet fungere som forventet.



Batterier til høreapparatet skal aldri lades, da kan de eksplodere.



Et utladet batteri må aldri ligge i høreapparatet under oppbevaring. Det kan lekke, og høreapparatet kan bli ødelagt.



Kast brukte batterier slik det er angitt på pakken, og merk deg utløpsdatoen.

Varsel om lite batteri


Når batteriet er utladet, vil et lydsignal varsle om dette. Hvis batteriet tap-
pes plutselig, kan det skje at du ikke blir varslet. Vi anbefaler at du alltid har
med deg et ekstra batteri.

Bytte batteri

Slik bytter du batteri:



Ta av teipen på det nye batteriet, og sjekk at det ikke
kleber. Luft batteriet i 60 sekunder.

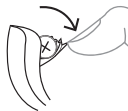

Bruk neglesporet til å åpne batteriluken, slik at du får
tatt ut det gamle batteriet.



Sett deretter det nye batteriet i holderen som vist. Lukk holderen. Hvis det er vanskelig å sette holderen på plass, er ikke batteriet satt inn riktig. Ta ut batteriet hvis du ikke bruker høreapparatet på noen dager.

MERK

Unngå å miste høreapparatet på bakken. Hold høreapparatet over et mykt underlag når du skal skifte batteri.

Lydsignaler

Høreapparatet avgir lydsignaler for å informere deg om at enkelte funksjoner er aktivert, eller at du har endret programmet. Disse lydene kan være talebeskjeder eller toner, avhengig av hvilke behov og preferanser du har.

Program 1	Melding / ett kort pip
Program 2	Melding / to korte pip
Program 3	Melding / tre korte pipetoner
Program 4	Melding / ett kort og ett langt pip
Program 5	Melding / ett langt pip og to korte pip
Zen+	Melding/tone

Be hørselsspesialisten om å slå av disse lydsignalene hvis du ikke trenger dem.

Mistet høreapparat-partner


(Kun tilgjengelig for utvalgte modeller)

Hørselsspesialisten kan slå på en funksjon i høreapparatet som varsler deg når den mister kontakten med høreapparatet i det andre øret. Du vil få en talebeskjed i øret.

Forskjellen mellom venstre og høyre apparat

Høreapparatet til høyre øre har et rødt merke. Høreapparatet til venstre øre har et blått merke.

Slå høreapparatet av og på

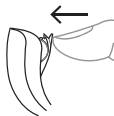

Slå høreapparatet på ved å lukke batteriluken. Høreapparatet vil spille av et lydsignal for å indikere at det er slått på, med mindre høreapparatspesialisten har deaktivert denne funksjonen.



Slå av høreapparatet ved å trekke batteriluken nedover.

MERK

Ikke glem å slå av høreapparatet når det ikke er i bruk.

Sette inn og ta ut høreapparatet


Sette på høreapparatet



1. Sett øreproppsettet inn i øret mens du holder i den nederste delen av slangen/ledningen. Det kan være lurt å trekke det ytre øret oppover og bakover samtidig.
2. Fest deretter høreapparatet bak øret. Høreapparatet skal hvile komfortabelt på øret, tett inn mot hodet.

Høreapparatet kan tilpasses med ulike typer øreproppsett. Se øreproppsettets håndbok for mer informasjon om akkurat ditt øreproppsett.

Ta ut høreapparatet

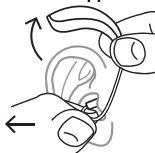

Start med å ta av høreapparatet fra baksiden av øret.

Ta deretter øreproppsettet forsiktig ut fra øret mens du holder i den nederste delen av slangen/ledningen.

Lydjustering

Høreapparatet justerer volumet automatisk i henhold til lydmiljøet.

Hvis du har en fjernkontroll, kan du også justere lyden manuelt, avhengig av hvilke behov og preferanser du har.

Hver gang du betjener volumkontrollen, vil du høre en pipetone, med mindre hørselsspesialisten har deaktivert denne funksjonen. Når du kommer til maks. eller min. innstilling, vil du høre en jevn tone.

Du kan også dempe høreapparatet hvis du ønsker det. Slik går du frem:

- Hold inne den nederste delen av volumtasten på fjernkontrollen til du hører en jevn lyd

Slik slår du lyden på igjen:

- Trykk på den øvre delen av volumkontrollen **eller**
- Bytte program

All volumjustering vil bli avbrutt når du slår av høreapparatet, eller hvis du bytter program.

Programmer

PROGRAMMER	BRUK
Master	Til daglig bruk
Musikk	Til lytting til musikk
TV	Til lytting til TV-en
Komfort	bakgrunnsstøy
Demper bakgrunnsstøy	Fokus på lyder bakfra.
Telefon	Dette programmet er laget for å lytte til telefonsamtaler

PROGRAMMER**BRUK**

Zen

Spiller av toner eller støy som en avslappende lydbakgrunn

SPESIALPROGRAMMER**BRUK**

Sammensatte programmer

Masterprogrammet i det ene øret og zen, fokus bakover eller telefon i det andre

**SMARTTOGGLE-PROGRAM-
MER**

Zen+

Dette programmet ligner på Zen, men du kan lytte til ulike typer toner eller støy

MERK

Ikke alle høreapparater kan brukes med en fjernkontroll.

Hvis behovene endrer seg over tid, kan hørselsspesialisten enkelt endre programvalg.

Zen-programmet

Høreapparatet ditt kan være utstyrt med et unikt, valgfritt lytteprogram som kalles Zen. Det skaper musikalske toner (og noen ganger en susende lyd) i bakgrunnen.



Hvis du opplever en reduksjon i lydstyrken, lydtoleransen, tale som ikke er så tydelig eller forverret tinnitus, skal du ta kontakt med helsepersonell.



Bruk av Zen-programmet kan forstyrre høringen av hverdagslyder, inkludert tale. Det bør ikke brukes når det er viktig å kunne høre slike lyder. Koble om høreapparatet til et annet program enn Zen i slike situasjoner.

Bytte programmer

Bytt mellom programmer ved å trykke på programtasten på fjernkontrollen.

Zen+

Åpne programmet ved å trykke på og holde inne programtasten i mer enn ett sekund. Et raskere trykk etterpå brukes til å veksle mellom de ulike Zen-valgene. Avslutt programmet ved å trykke på og holde inne programtasten i mer enn ett sekund.

Bruke en telefon med høreapparat




Når du skal bruke telefonen, holder du den mot hodet i en vinkel over øret, i stedet for direkte mot øret.

RENGJØRING

Verktøy

Følgende rengjøringsverktøy leveres med høreapparatet:

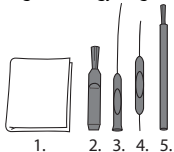

1. Klut
2. Børste
3. Verktøy med lang ende for fjerning av ørevoks
4. Verktøy med kort ende for fjerning av ørevoks
5. Batterimagnet

Rengjøring

Hvis du rengjør høreapparatet hver dag, vil det fungere mer effektivt og være mer behagelig å bruke.



Tørk av høreapparatet med en myk klut (for eksempel kluten du fikk fra hørselsspesialisten).
Ta kontakt med hørselsspesialisten hvis mikrofonåpningene fortsatt er tilstoppet.

Tørk høreapparatet så raskt som mulig hvis det blir vått, eller hvis du svetter mye. Noen bruker en spesiell avfukter som f.eks. Widex PerfectDry Lux for å holde høreapparatet tørt og rent. Spør hørselsspesialisten om dette kan være noe for deg.

La batterirommet stå åpent for å ventilere høreapparatet. Se øreproppsettets håndbok for informasjon om rengjøring av øreproppsettet.



Væske eller desinfeksjonsmiddel skal ikke brukes til rengjøring av høreapparatet.



Rengjør og undersøk høreapparatet hver dag etter bruk for å sjekke at det ikke er ødelagt. Hvis høreapparatet blir ødelagt under bruk, slik at små fragmenter blir liggende inne i øregangen, bør du kontakte legen din. Du bør ikke prøve å ta ut fragmentene selv.

TILBEHØR

Du kan bruke en rekke tilbehør sammen med høreapparatet. Spør hørsels-spesialisten om du kan ha nytte av å bruke noe av dette tilbehøret.

Navn	Bruk
RC-DEX	fjernkontroll
TV-DEX	for å lytte til TV og lyd
PHONE-DEX 2	for enkel fasttelefonbruk
FM+DEX	for strømming av lyd og FM-signaler
UNI-DEX	for tilkobling av høreapparater til mobiltelefoner
CALL-DEX	for enkel trådløs tilkobling til mobiltelefoner
COM-DEX	for trådløs tilkobling til mobiltelefoner og andre enheter via Bluetooth
COM-DEX Remote Mic	for å hjelpe høreapparatbrukere høre tale i vanskelige lyttesituasjoner

Kun tilgjengelig i noen land.

FEILSØKING

Disse sidene inneholder råd om hva du skal gjøre hvis høreapparatet slutter å fungere, eller hvis det ikke fungerer som forventet. Ta kontakt med hørselsspesialisten hvis problemet vedvarer.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Høreapparatet er helt lydløst	Den er ikke slått på	Kontroller at batteriholderen er helt lukket
	Batteriet fungerer ikke	Sett inn nytt batteri
Volumet i høreapparatet er ikke kraftig nok	Øret er tilstoppet av ørevoks	Ta kontakt med lege
	Hørselen kan ha endret seg	Ta kontakt med hørselsspesialist/lege
Høreapparatet piper kontinuerlig	Øret er tilstoppet av ørevoks	Ta kontakt med lege
De to høreapparatene fungerer ikke synkront	Forbindelsen mellom høreapparatene er borte	Slå dem av og på igjen

Problem	Mulig årsak	Løsning
Høreapparatet svarer ikke på endringer i volum eller program som foretas av kontrollenheten	<ul style="list-style-type: none"> a. Enheten brukes utenfor anbefalt rekkevidde b. Det er sterke elektromagnetiske forstyrrelser i nærheten c. Enheten og høreapparatet er ikke sammenkoblet 	<ul style="list-style-type: none"> a. Flytt enheten nærmere høreapparatet. b. Gå unna eventuelle kilder til elektromagnetisk interferens c. Be hørselsspesialisten sjekke om enheten er sammenkoblet med høreapparatet
Du hører "avbrutt" tale (av og på) fra høreapparatet eller ingen tale (avslått lyd) fra det andre høreapparatet	<ul style="list-style-type: none"> a. Batteriet i ett av høreapparatene er utladet b. Det er sterke elektromagnetiske forstyrrelser i nærheten 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bytt batteri i ett av eller begge høreapparatene b. Gå unna eventuelle kilder til interferens

MERK

Denne informasjonen gjelder bare for høreapparatet. Se "Øreproppsett for Widex-høreapparat" for informasjon som gjelder ditt øreproppsett. Hvis problemet vedvarer, må du ta kontakt med en hørselsspesialist.

INFORMASJON OM SPESIELLE PÅBUD

EU-direktiver

Direktiv 2014/53/EU

Widex A/S erklærer herved at denne D-PA er i overensstemmelse med de vesentlige kravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU.

D-PA inneholder en radiosender som sender på 10,6 MHz, 54dBA/m @10 m.

En kopi av samsvarserklæringen iht. 2014/53/EU finnes på: <https://global.widex.com/doc>



N26346

Informasjon om kassering

Ikke kast høreapparater, høreapparattilbehør og batterier sammen med vanlig husholdningsavfall.

Høreapparater, batterier og høreapparattilbehør skal leveres på avfallsstasjoner som er beregnet for elektrisk og elektronisk avfall, eller returneres til hørselsspesialisten.

FCC- og IC-erklæringer

FCC ID: TTY-DPA

IC: 5676B-DPA

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Wi-dex could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Statement / Déclaration d'industrie Canada

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SYMBOLER

Ofte brukte symboler av Widex A/S på merkingen av medisinske enheter (etiketter/bruksanvisninger/osv.)

Symbol	Tittel/Beskrivelse
--------	--------------------

**Produsent**

Produktet er fremstilt av produsenten som er nevnt med navn og adresse ved siden av symbolet. Dersom det er hensiktsmessig, er også fremstillingsdatoen oppgitt.

**Katalognummer**

Produktets katalognummer (enhetsnummer).

**Se bruksanvisningen**

Bruksanvisningen inneholder viktig forsiktighetsinformasjon (advarsler/forholdsregler) og må leses før produktet tas i bruk.

**Advarsel**

Tekst merket med et advarsel-symbol skal leses før produktet tas i bruk.

**WEEE-symbol**

"Skal ikke kastes med vanlig avfall." Når et produkt skal kastes, må det leveres inn på en avfallstasjon til resirkulering og gjenvinning for å forhindre risiko for skade på miljøet eller menneskers helse som følge av eventuelle farlige stoffer.

**CE-merke**

Produktet er i samsvar med kravene i EU-direktivene om CE-merking.

Symbol	Tittel/Beskrivelse
---------------	---------------------------



	RCM-merke
--	------------------

	Produktet er i samsvar med EMC-direktivet og relevante forskrifter for radiospektrum for produkter levert til det australske eller newzealandske markedet.
--	--



WIDEX A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngby, Danmark

<https://global.widex.com>



Manual no.:
9 514 0219 011 05
Issue:
2020-06

