

WIDEX **SUPER**[™]
THE POWER TO HEAR

KULLANMA KILAVUZU

WIDEX **SUPER**[™] AİLE

S-VS modeli
Kanaldaki alıcı/Kulaktaki alıcı



WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

İŞİTME CİHAZINIZ

(İşitme sağlığı uzmanınız tarafından doldurulacak)

İşitme cihazı seriniz:

PROGRAMLAR

Ana

Müzik

TV

Rahat

Ters odak

İşitilebilirlik Arttırıcı

Telefon

T

M+T

Klasik

Birleşik programlar

Zen

SMARTTOGGLE PROGRAMLARI

Zen+

Telefon+

AKLINIZDA BULUNDURUN

İşitme cihazınızı kullanmaya başlamadan önce bu kitapçığı ve “Widex işitme cihazı için kulak setleri” kitapçığını okuyun.

İÇİNDEKİLER

İŞİTME CİHAZINIZ.....	6
Hoş Geldiniz.....	6
Bir bakışta işitme cihazınız.....	6
Önemli güvenlik bilgileri.....	8
İŞİTME CİHAZI.....	10
Kullanım yerleri.....	10
Kullanım amacı.....	10
Pil.....	10
Pil zayıf uyarısı.....	11
Pilin değiştirilmesi.....	11
Kurcalamaya karşı korumalı pil yuvası.....	12
Ses sinyalleri.....	12
Kayıp ortak	13
Sağ ve sol parçaları birbirinden ayırt etmek.....	13
İşitme cihazının açılması ve kapatılması.....	13
İşitme cihazını takma ve çıkarma.....	14
İşitme cihazının çıkarılması.....	14
Ses ayarı.....	14
Programlar.....	15
Zen programı.....	17

Program deęiřtirme.....	18
İřitme cihazlarınız ile bir telefon kullanmak.....	18
TEMİZLEME.....	19
Araçlar.....	19
İřitme cihazının temizlenmesi.....	19
AKSESUARLAR.....	21
SORUN GİDERME.....	22
DÜZENLEYİCİ BİLGİLER.....	24
EC yönergeleri.....	24
Yönerge 2014/53/EU.....	24
İmha ile ilgili bilgiler.....	24
FCC ve IC bildirimleri.....	25
SEMBOLLER.....	28

İŞİTME CİHAZINIZ

Hoş Geldiniz


Yeni işitme cihazınızı aldığınız için tebrik ederiz.

Alışması vakit alsa bile işitme cihazınızı düzenli aralıklarla kullanın. Sık kullanmayan kullanıcılar, genellikle işitme cihazından tam olarak yararlanamazlar.


AKLINIZDA BULUNDURUN

İşitme cihazınız ve aksesuarları bu kitapçıkta gösterilenler ile birebir aynı olmayabilir. Ayrıca gerekli gördüğümüzde her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutuyoruz.

Bir bakışta işitme cihazınız

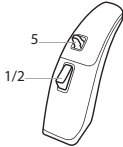

1. Program düğmesi
2. LED (Sadece eczacıların kullanımı içindir)

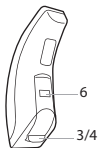

3. Açma/Kapatma düğmesi
4. Tırnak çıkıntılı pil yuvası
5. Ses kontrolü
6. Sağ/sol belirleme

Önemli güvenlik bilgileri

İşitme cihazınızı kullanmadan önce bu sayfaları dikkatlice okuyun.



İşitme cihazları ve pillerin yutulması ya da uygunsuz kullanımı tehlikeli olabilir. Yutulması ya da uygunsuz kullanılması ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabilir. Yutulması durumunda hemen size en yakın acil servisle veya hastaneyle iletişime geçin.



İşitme cihazlarınızı kullanmadığınız zamanlar çıkarın. Bu, kulak kanallarınızın havalanmasını sağlar ve bu şekilde kulak enfeksiyonu oluşumu önlenir.



Kulağınızda kulak enfeksiyonu veya alerjik reaksiyon meydana geldiğinden şüpheleniyorsanız derhal doktora veya işitme sağlığı uzmanına başvurun.



İşitme cihazınız rahatsızlık veriyorsa veya tahribat, kızarıklık veya bu gibi olumsuz etkilere sebep olarak, kulağınıza tam bir şekilde uyum sağlamazsa, işitme sağlığı uzmanınıza danışın.



İşitme cihazlarınızı banyo yapmadan, yüzmeden veya saç kurutucusu kullanmadan önce çıkarın.



Parfüm, sprey, jel, losyon veya krem kullanırken işitme cihazlarınızı kullanmayın.



İşitme cihazınızı mikrodalga fırında kurutmayın bu cihazınızın bozulmasına neden olur.



Asla başkalarının işitme cihazlarını kullanmayın ve başkalarının da sizin cihazınızı kullanmasına izin vermeyin, çünkü bu işitmeniz de sorunlara neden olabilir.



İşitme cihazlarınızı maden ocağı gibi patlayıcı gazların mevcut olduğu ortamlarda kullanmayın.



İşitme cihazlarınızı, cihazınızın parçalarını, aksesuarlarını ve pillerini çocukların veya zihinsel engelli kişilerin ulaşamayacağı yerde bulundurun.



İşitme cihazını kendi başınıza açmaya ya da tamir etmeye çalışmayın. İşitme cihazınızın tamir edilmesi gerekirse, işitme sağlığı uzmanınızla iletişime geçin.



İşitme cihazınız, telsiz iletişim teknolojisi içerir. Cihazları kullandığınız çevreyi her zaman gözlemleyin. Herhangi bir kısıtlama uygulanması durumunda, bunlara uymak için bazı önlemler almalısınız.



İşitme cihazınız çok güçlüdür ve 132 dB'yi aşan sesleri çalabilir. Bu da mevcut olan işitme yetinizde hasara yol açabilir.



İşitme cihazınızı aşırı ısıya veya yüksek neme maruz bırakmayın ve cihazınız ıslandıysa veya çok terlediyseniz derhal kurutun.

İşitme cihazlarınız -20°C ila +55°C (-4°F ila 131°F) sıcaklıkları arasında ve %10-%95 rH nem aralığında muhafaza edilmeli ve taşınmalıdır.

İşitme cihazlarınız, 0°C (32°F) ila 50°C (122°F), %10-%95 rH ve 750 1060 mBar sıcaklık, nem ve atmosfer basıncı aralığında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

İşitme cihazınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret ediniz:
www.widex.com

İŞİTME CİHAZI

Kullanım yerleri

İşitme cihazları, orta seviyeden (40 dB HL) ileri dereceye-çok derin dereceye (120 dB HL) kadar tüm işitme kaybı derecelerinde ve tüm işitme kaybı konfigürasyonlarında kullanılabilir.

Cihazlar, işitme rehabilitasyonu konusunda eğitim almış yetkili işitme sağlığı uzmanları (odyologlar, işitme cihazı uzmanları, otolaringolojistler) tarafından programlanmalıdır.

Kullanım amacı

İşitme cihazları günlük dinleme ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmış hava iletimli güçlendirme cihazlarıdır. İşitme cihazları, sessiz bir arka plan dinlemek isteyen yetişkinler için rahatlatıcı bir ses arka planı (örn: müzik/gürültü kaynağı) sunmak üzere Zen programı ile birlikte sunulabilir.

Pil

İşitme cihazınız için **tip 675 çinko-hava** pili kullanın. Her zaman, mutlaka kulak sağlığı uzmanınızın önerdiği yeni pili kullanın.

AKLINIZDA BULUNDURUN

İşitme cihazına takmadan önce, pilin tamamen temiz olduğunu ve hiçbir kalıntı içermediğini kontrol edin. Aksi takdirde, işitme cihazınız, beklenildiği gibi çalışmayabilir.



Patlama ihtimali olduğu için asla işitme cihazı pillerinizi tekrar şarj etmeye çalışmayın.



İşitme cihazınızı saklayacağınız zaman asla boş pili içinde bırakmayın. Pil akıntı yaparak işitme cihazınıza zarar verebilir.



Kullanılmış pilleri, paket üstünde gösterildiği şekilde bertaraf edin ve son kullanma tarihini not alın.

Pil zayıf uyarısı

Pil boşken, bir sesli sinyal duyulur. Ancak, pil aniden biterse herhangi bir uyarı yapılmayabilir. Gittiğiniz her yere yedek bir pil taşımanızı öneririz.

Pilin değiştirilmesi

Pili değiştirmek için, şunları uygulayın:



Yeni pilin yapışkan şeridini çıkarın ve üzerinde yapışkan madde olmadığından emin olun. 60 saniyelikliğine “havalanmasını” sağlayın.



Pil kapağını hafifçe açmak için tırnağınızın ucunu kullanın ve eski pili çıkarın.



Ardından, gösterilen şekilde yeni pili yuvaya yerleştirin. Yuvayı kapatın. Kolay kapanmıyorsa pil düzgün yerleştirilmemiştir.


İşitme cihazınızı birkaç günlüğüne kullanmayacaksınız, pili çıkarın.

AKLINIZDA BULUNDURUN

İşitme cihazınızı düşürmemeye dikkat edin - pili değiştirirken cihazı yumuşak bir yüzeyin üstünde tutun.

Kurcalamaya karşı korumalı pil yuvası

İşitme cihazı bir çocuk veya zihinsel engelli bir kişi tarafından kullanılacaksa, kulak sağlığı uzmanınızdan kurcalamaya karşı bir pil yuvası isteyebilirsiniz.

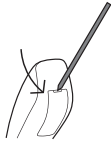

Pil yuvasını açmak için aldığınız özel aracı kullanın ve resimde gösterildiği gibi yapın.

Ses sinyalleri

İşitme cihazınız, bazı özelliklerin etkinleştirildiğini veya program değiştirdiğinizi bildirmek için bazı sesler çalar. Bu sesler, ihtiyaçlarınıza göre sesli mesajlar veya sesler olabilir.

Program 1 Mesaj/tek bip sesi

Program 2 Mesaj/iki bip sesi

Program 3 Mesaj / üç kısa bip sesi

Program 4 Mesaj / bir uzun bir kısa bip sesi

Program 5 Mesaj / bir uzun iki kısa bip sesi

Bu ses sinyallerine ihtiyacınız yoksa, kulak sağlığı uzmanınızdan bu sesleri kapatmasını isteyin.

Kayıp ortak


(Sadece seçili modeller mevcuttur)

İşitme sağlığı uzmanınız, işitme cihazınız diğer kulaktaki cihazla bağlantıyı kaybettiğinde sizi uyaracak bir özelliği açabilir. Kulağınızda sesli mesaj duyacaksınız.


Sağ ve sol parçaları birbirinden ayırt etmek

Sağ kulak işitme cihazınızda kırmızı işaret vardır. Sol kulak işitme cihazınızda mavi işaret vardır.

İşitme cihazının açılması ve kapatılması

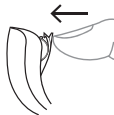

İşitme cihazını açmak için pil kapağını kapatın. İşitme sağlığı uzmanınız bu işlevi kapatmadıysa işitme cihazı açıldığını gösteren bir ses çıkaracaktır.

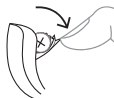

İşitme cihazını kapatmak için pil kapağını aşağı doğru çekin.

AKLINIZDA BULUNDURUN

Kullanmadığınız zamanlarda işitme cihazınızı kapatmayı unutmayın.

İşitme cihazını takma ve çıkarma




1. Tüpün/kulak telinin alt kısmını tutarak kulak setini kulağa takın. Dış kulağı aynı esnada öne veya arkaya çekmek yardımcı olabilir.

2. Ardından işitme cihazını kulağın arkasına yerleştirin. İşitme cihazı, başınıza yakın bir yerde kulağa rahat bir şekilde oturmalıdır.

İşitme cihazınız, farklı kulak setleri kullanılarak takılabilir. Kulak setinizle ilgili daha fazla bilgi için ayrı olarak sunulan kulak seti kılavuzuna bakın.

İşitme cihazının çıkarılması

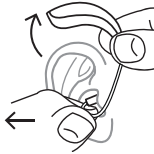

İşitme cihazını kulağın arkasındaki konumundan çıkararak başlayın.

Ardından tüpün/kulak telinin alt kısmını tutarken kulak setini dikkatlice kulak kanalından çıkarın.

Ses ayarı

İşitme cihazınız, ses ortamınıza göre sesi otomatik olarak ayarlar.

İhtiyaçlarınız ve tercihlerinize göre sesi manuel olarak da ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için ses seviyesini azaltmak veya yükseltmek istediğinize bağlı olarak çubuğu yukarı veya aşağı doğru basıtırın.

İşitme sağlığı uzmanınız bu işlevi devre dışı bırakmadıkça ses kontrolünü her kullandığınızda, bir bıp sesi duyarsınız. Maksimum veya minimum ayarlara ulaştığınızda, sabit bir ses duyarsınız.

Ayrıca, ihtiyaç duyarsanız işitme cihazınızın sesini kapatabilirsiniz. Şu şekilde yapın:

- Sabit ses duyana kadar çubuğu aşağı doğru bastırmaya devam edin

Sesi tekrar açmak için:

- Çubuğu yukarı doğru itin **veya**
- Program değiştirin

İşitme cihazını kapattığınızda ya da program değiştirdiğinizde yapılan tüm ses ayarları iptal olur.

Programlar

PROGRAM	KULLANIM
Ana	Standart
Müzik	Müzik dinlemek isterseniz bu programı kullanın
TV	TV dinlemek isterseniz bu program idealdir
Rahat	Bu program arka plan gürültüsünü azaltır

PROGRAM	KULLANIM
Klasik	Bu program süper güçlü işitme cihazlarını uzun vadede kullanan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Geleneksel, süper güçlü işitme cihazlarının ses kalitesi ayarındadır.
Ters odak	Arkanızdan gelen seslere odaklanmak isterseniz bu programı kullanın
Telefon	Telefon konuşmalarını dinlerken bu programı kullanın
T	Bu program ile, işitme cihazınızın arka plan gürültüsü olmadan sesi doğrudan dinlemenizi sağlayan telecoil aracılığıyla dinleyebilirsiniz
M+T	Bu program, dinleme cihazının mikrofonu ve telecoil kombinasyonudur. Ses kaynağını dinlerken diğer sesleri de duyabilirsiniz
Zen	Rahatlatıcı bir ses arka planı için sesler ve gürültü çalar
Birleşik programlar	Bir işitme cihazında Ana program ve diğerinde Zen, Geriye Odaklanma, T, MT veya Telefon programı
SMARTTOGGLE PROGRAMLARI	KULLANIM
Zen+	Bu program Zen'e benzemekle beraber farklı türde sesler veya gürültü dinlemenize olanak tanır

SMARTTOGGLE PROGRAMLARI

KULLANIM

Telefon+

Bu program telefonu dinlerken ortam seslerinden kaçınmanızı sağlar. İşitme cihazlarınızdan biri, telefon konuşmasını diğerine aktarır, böylece her iki kulakla dinleyebilirsiniz – bu durum telefon konuşmasını anlamayı kolaylaştırır.

AKLINIZDA BULUNDURUN

İşitme cihazınızda yalnızca bir SmartToggle programı olabilir.

Belli tipte işitme kaybınız varsa, işitme sağlığı uzmanınız Odibilite Genişletici özelliğini etkinleştirebilir. Bu özellik kuşların ötmesi ve çocuk sesi gibi sesleri duymanızı sağlar. Bundan yararlanıp yararlanmayacağınızı öğrenmek için işitme sağlığı uzmanınız ile temasa geçin.

İhtiyaçlarınız ve tercihleriniz zamanla değişirse, işitme sağlığı uzmanınız, program seçimini kolayca değiştirebilir.

Zen programı

İşitme cihazınız Zen adı verilen özel isteğe bağlı işitme programı ile birlikte temin edebilirsiniz. Program, arka planda müzik sesleri (ve bazı zamanlar koşuşturma sesleri) dinletir.



Ses şiddetinde ve ses toleransında bir düşüş veya konuşma seslerinin anlaşılabilmesinde ya da giderek artan kulak çınlaması gibi sorunları fark ederseniz işitme sağlığı uzmanınıza başvurun.



Zen programı, işitme günlük sesleri dahil olmak üzere, konuşma engel olabilir. Çevrenizdeki sesleri duymanız gerektiğinde bu program kullanılmamalıdır. Bu durumlarda işitme cihazının Zen programını kapatın.

Program deęiřtirme

Programları deęiřtirmek için sadece program düęmesine basmanız yeterli.

AKLINIZDA BULUNDURUN

Telefon+ programı, uzaktan kumanda kullanılarak erişilemez.

Zen+

Program düęmesine basıp bir saniyeden fazla basılı tutarak bu programa erişebilirsiniz. Daha kısa bastığınızda Zen stilleri arasında geçiş yapar. Program düęmesine basıp bir saniyeden fazla basılı tutarak bu programdan çıkabilirsiniz.

Telefon+

Program düęmesine basıp bir saniyeden fazla basılı tutarak bu programa erişebilirsiniz. Programı bırakmak için aynı işlemi uygulayın.

İřitme cihazlarınız ile bir telefon kullanmak




Telefon kullanırken telefonu doğrudan kulađınıza dayamak yerine başınıza paralel şekilde biraz aç vererek tutmanızı öneririz.

TEMİZLEME

Araçlar

İşitme cihazınızla birlikte aşağıdaki temizleme cihazlarına sahip olacaksınız:

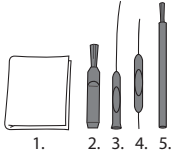

1. Bez
2. Fırça
3. Uzun vaks giderme aracı
4. Kısa vaks giderme aracı
5. Pil mknatısı

İşitme cihazının temizlenmesi

İşitme cihazınızı her gün temizlemek, cihazı daha verimli ve daha rahat takılabilir bir hale getirecektir.



İşitme cihazınızı yumuşak bir bezle silin (örneğin işitme sağlığı uzmanınızdan aldığınız bezle). Mikrofon çıkışları tıkalıysa, işitme sağlığı uzmanınıza danışın.

İşitme cihazınız ıslandıysa veya çok terlediyseniz derhal kurutun. Bazı kişiler, işitme cihazlarını kuru ve temiz tutmak için Widex PerfectDry Lux gibi nem gidericiler kullanır. Bunun sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için işitme sağlığı uzmanınız ile temasa geçin.

Kullanılmıyorken işitme cihazını havalandırmak için pil bölümünü açık bırakın. Kulak setini temizlemeyle ilgili daha fazla bilgi için kulak seti kılavuzuna bakın.



İşitme cihazınızı temizlemek için herhangi bir sıvı veya dezenfektan kullanmayın.



İşitme cihazını kullandıktan sonra her gün temizleyin ve zarar görüp görmediğini kontrol edin. İşitme cihazınızı takarken cihaz zarar görmüşse ve kulak kanalında küçük parçalar bırakıyorsa doktorunuzla iletişime geçin. Parçaları asla kendiniz çıkarmaya çalışmayın.

AKSESUARLAR

İşitme cihazınızla birlikte çeşitli aksesuarlar kullanabilirsiniz. Bu aksesuarları kullanmaktan yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenmek için işitme sağlığı uzmanınıza danışın.

Adı	Kullanım
RC-DEX	uzaktan kumanda
TV-DEX	TV ve ses cihazlarını dinlemek için
PHONE-DEX 2	kolay sabit hat kullanımı için
FM+DEX	akan ses ve FM sinyalleri için
T-DEX	telecoil vasıtasıyla işitme cihazını cep telefonlarına bağlamak için
UNI-DEX	işitme cihazını cep telefonlarına bağlamak için
CALL-DEX	cep telefonlarına kolay kablosuz bağlantı için
COM-DEX	Bluetooth vasıtasıyla cep telefonlarına veya diğer cihazlara kablosuz bağlantı için
COM-DEX Remo- te Mic	dinlemenin zor olduğu durumlarda işitme cihazı kullanıcılarının konuşmaları duyabilmesine yardımcı olmak için

Sadece bazı ülkelerde geçerlidir.

SORUN GİDERME

Bu sayfalar, işitme cihazınızın çalışmayı durdurduğu veya istenildiği gibi çalışmadığı durumlarda yapmanız gerekenleri içermektedir. Sorun devam ediyorsa, işitme sağlığı uzmanınız ile irtibat kurun.

Sorun	Olası sebep	Çözüm
İşitme cihazından hiç ses gelmiyor	Açılmamıştır	Pil yuvasının tamamen kapalı olduğundan emin olun
	Pil çalışmıyor	Yeni bir pil takın
İşitme cihazının sesi yerince güçlü değil	Kulak kiri sebebiyle kulacağınız tıkanmıştır	Doktorunuzla irtibata geçin
	İşitme yetinizde fark olabilir	İşitme sağlığı uzmanınızla/doktorunuzla iletişime geçin
İşitme cihazı sürekli bipliyor	Kulak kiri sebebiyle kulacağınız tıkanmıştır	Doktorunuzla irtibata geçin
İki işitme cihazınız eş zamanlı şekilde çalışmıyor	İşitme cihazları arasındaki bağlantı kopmuştur	Cihazları kapatıp tekrar açın

Sorun	Olası sebep	Çözüm
İşitme cihazları kontrol cihazında yapılan ilgili ses veya program değişikliklerine cevap vermiyor	<p>a. Cihaz, kapsama alanı dışında kullanılmaktadır</p> <p>b. Cıvarda güçlü elektromanyetik karışma vardır</p> <p>c. Cihaz ve işitme cihazları eşleştirilmemiştir</p>	<p>a. Cihazı işitme cihazlarına yaklaşırın.</p> <p>b. Bilinen EM karışma kaynağından uzaklaşın</p> <p>c. Cihazın işitme cihazları ile eşleştiğinden emin olmak için işitme sağlığı uzmanınız ile birlikte kontrol edin</p>
İşitme cihazlarından "kesintili" ses (açık ve kapalı) duyuluyor veya diğer kulakta hiç ses duyulmuyor (sessiz).	<p>a. İşitme cihazlarının birinin pili bitmiştir</p> <p>b. Cıvarda güçlü elektromanyetik karışma vardır</p>	<p>a. İşitme cihazının birisinin veya her ikisinin pilini değiştirin</p> <p>b. Bilinen karışma kaynaklarından uzaklaşın</p>

AKLINIZDA BULUNDURUN

Bu bilgiler sadece işitme cihazını kapsar. Kulak setinize özel bilgiler için "Widex işitme cihazları için kulak setleri" kullanım kılavuzuna bakınız. Sorun devam ederse, destek için işitme sağlığı uzmanınızla iletişime geçin.

DÜZENLEYİCİ BİLGİLER

EC yönergeleri

Yönerge 2014/53/EU

İşburada, Widex A/S, bu S4-VS modelinin 2014/53/EU sayılı Yönergenin temel gerekliliklerini ve ilgili diğer tüm hükümlerini karşılar nitelikte olduğunu beyan eder.

Bu S4-VS, 10,6 MHz, -54 dB μ A/m @10 m'de çalışan bir radyo vericisi içermektedir.

2014/53/EC uyarınca Uygunluk Beyanının bir kopyasına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

<http://global.widex.com/doc>



N26346

İmha ile ilgili bilgiler

İşitme cihazlarını, işitme cihazı aksesuarlarını ve pilleri evlerde bulunan sıradan atıklarla birlikte bertaraf etmeyin.

İşitme cihazı, bataryalar ve işitme cihazı aksesuarları, elektrikli ve elektronik ekipman atıkları için ayrılan alanlarda imha edilmeli veya güvenli imha için işitme sağlığı uzmanınıza verilmelidir.

FCC ve IC bildirimleri

FCC ID: TTY-S4VS

IC: 5676B-S4VS

Federal İletişim Komisyonu Beyanı

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Çalışma, aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- (1) Bu cihaz, zararlı parazitlenmeye yol açmaz, ve
- (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya yol açabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan her paraziti kabul eder.

NOTE:

Bu ekipman, test edilmiş olup FCC Kurallarının 15. bölümüne göre B Sınıfı bir dijital cihaza yönelik sınırlarla uyumludur. Bu sınırlar, bir yerleşim yeri kurulumunda zararlı parazitlere karşı geçerli bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, parazitin özel bir kurulumda gerçekleşmeyeceğini garanti etmez. Bu ekipman, radyo ve televizyon alıcısında ekipmanı açıp kapayarak belirlenebilen zararlı bir parazite neden olursa kullanıcı aşağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını paraziti düzeltmeyi denemek için kullanır:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirme veya yeniden yerleştirme.
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırma.
- Alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize bağlama.

— Yardım için bir bayiye veya deneyimli bir /TV teknisyenine danışma.

NOTE:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam sunmaya çalışan FCC radyasyon maruziyet sınırları ile uyumludur. Bu verici, diğer anten ve vericiler ile bağlantılı veya birlikte çalışmalıdır.

Ekipmana, Wixed tarafından açıkça onaylanmadan yapılan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.

Industry Canada Beyanı / Déclaration d'industrie Canada

Bu radyo vericisi, sadece Industry Canada düzenlemeleri kapsamında, Industry Canada'nın onayladığı türden ve maksimum (veya daha az) kazanımdan olan bir anten kullanılarak çalışabilir.

Diğer kullanıcılara olası radyo parazitini azaltmak için, başarılı iletişim amacıyla anten türünün ve kazanımının eşdeğer izotropik yayımlı güç (e.i.r.p) gerekenden fazla olmayacak şekilde seçilmesi gerekir.

Bu cihaz, Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarıyla uyumludur. Çalışma, aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

(1) bu cihaz, parazitlenmeye yol açmaz, ve

(2) bu cihaz, cihazda istenmeyen çalışmaya yol açabilecek parazitler de dahil olmak üzere hiçbir parazitlenmeyi kabul etmez..

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

SEMBOLLER

WIDEX A/S tarafından tıbbi cihaz etiketlemesinde (etiketler/IFU/vb.) yaygın olarak kullanılan semboller

Sembol Başlık/Açıklama



Üretici

Ürün sembolünün yanında adı ve adresi belirtilen üretici tarafından üretilmiştir. Uygun ise üretim tarihi de belirtilebilir.



Katalog numarası

Ürünün katalog (kalem) numarası.



Danışman kullanma talimatları

Önemli uyarı bilgileri (uyarılar/önlemler) içeren ve ürünü kullanmadan önce okunması gereken kullanıcı talimatları.



Uyarı

Uyarı sembolü ile işaretlenmiş metinler cihazı kullanmadan önce okunmalıdır.



WEEE işareti

"Genel atık değildir". Bir ürün bertaraf edileceği zaman, zararlı maddelerin bulunmasından dolayı çevreye veya insan sağlığına zarar verme riskini engellemek için geri dönüşüm ve geri kazanım için özel toplama noktalarına gönderilmelidir.



CE işareti

Ürün Avrupa CE işaretleme yönergesinde belirtilen gereklilikler ile uyumludur.

Sembol **Başlık/Açıklama**



RCM işareti

Ürün, Avustralya veya Yeni Zelanda pazarına sunulan ürünler için elektriksel güvenlik, EMC ve radyo frekansı düzenleme gereklilikleri ile uyumludur.

Yetkili Servisler

DOĞUŞ MEDİKAL TIC. VE SAN. LTD. ŞTİ

Kale Mah. Osmaniye Cad. Belediye
Merk. Çarşısı 8/1 SAMSUN

Tel: 0362 431 57 58

DUYU İÇ ANADOLU İŞİT. CİH. TIC. VE SAN. LTD. ŞTİ

Millet Caddesi Huzur Apt 28/3 Melliğazi Kayseri

Tel: 0352 222 06 29

WIDEX TIBBİ VE TEKNİK CİHAZLAR SAN. VE TIC. A.Ş.

Barbaros Mah. Halk Cad. No:37/1

Ataşehir - İstanbul

Tel: 0216 210 0500

ODİO TEK - MAHMUT GÜLDÜ

Merkez Mah. Koca Mansur Sok. No:105 Şişli-İSTANBUL

Tel: 0212 231 99 93

İthalatçı Firma



TIBBİ VE TEKNİK CİHAZLAR SAN. VE TIC. A.Ş.

Merkez: BARBAROS MAH. HALK CAD. NO.37/1

ATAŞEHİR - İSTANBUL

TEL: +90 216 210 0500 (PBX) FAX: +90 216 210 0515

TAKSİM ŞUBE: TAKSİM, İNÖNÜ CAD. NO:12 ZEMİN KAT BEYOĞLU-İSTANBUL

TEL: +90 212 244 58 72 (PBX) FAX: +90 212 244 58 37

"İşitme cihazının Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır."



WIDEX A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø, Danimarka
global.widex.com



0459

Kılavuz no.:
9 514 0292 029 #03
Yayın Tarihi:
2019-02



9 514 0292 029 03