

WIDEX **MOMENT™**

NÁVOD K POUŽITÍ

THE WIDEX MOMENT™ FAMILY

Model MRR2D
RIC/RITE
(s reproduktorem ve zvukovodu / v uchu)



WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

VAŠE SLUCHADLO

(Vyplní sluchadlový odborník.)

Toto je seznam možných programů pro vaše sluchadlo.

Další informace o používání těchto programů viz Přizpůsobení.

Programy vašeho sluchadla:

PROGRAMY	ROZŠÍŘENÍ SLYŠITELNOSTI
<input type="checkbox"/> Univerzální	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PureSound	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ticho	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Komfort	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Automobil	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Město	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Řeč v hluku	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Restaurace	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Společnost	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Hudba	<input type="checkbox"/>

SPECIÁLNÍ PROGRAMY Zen Telefon**ROZŠÍŘENÍ SLYŠITELNOSTI****PROGRAMY +** Zen+**ROZŠÍŘENÍ SLYŠITELNOSTI**

Názvy programů v tabulce jsou výchozími názvy. Pokud se rozhodnete používat některé jiné dostupné názvy, vepište tyto nové názvy do tabulky. Díky tomu budete vždy vědět, které programy máte ve svých sluchadlech.

Přečtěte si návod

Než začnete sluchadlo používat, důkladně si přečtěte návod k použití uvedený v této příručce a příručce „Ušní sady pro sluchadla Widex“. Přečtěte si také návod k použití nabíječky.

Streamování zvuku a bezdrátové ovládání

Sluchadlo umožňuje streamování zvuku a přímé bezdrátové ovládání z chytrých telefonů a dalších zařízení pomocí ovladačů DEX. Chcete-li získat další rady a informace, kontaktujte svého sluchadlového odborníka nebo navštivte webové stránky: <https://global.widex.com>.

Sluchadlo lze používat bezdrátově s aplikací MOMENT. Naše společnost nenesе žádnou odpovědnost v případě použití sluchadla s aplikacemi jiných společností ani v případě použití aplikace s jiným zařízením. Další informace o aplikaci naleznete v příslušné příručce.

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	6
VAŠE SLUCHADLO.....	8
Vítejte.....	8
Základní informace o sluchadle.....	8
PODMÍNKY POUŽITÍ.....	10
Indikace pro použití.....	10
Sluchadla s dobíjecími bateriemi.....	10
Zamýšlené použití.....	10
Nabíjení.....	11
Doba provozuschopnosti a délka nabíjení.....	11
Podmínky provozu a nabíjení.....	13
Skladovací a přepravní podmínky.....	14
KAŽDODENNÍ POUŽITÍ.....	16
Vypínání a zapínání sluchadla.....	16
Nasazení a vyjmutí sluchadla.....	17
PŘÍZPŮSOBNÍ.....	18
Programy.....	18
Program Zen.....	20
Zvukové signály.....	20
Ztráta komunikace s druhým sluchadlem	22

Nastavení zvuku a programu.....	22
Používání chytrého telefonu se sluchadlem.....	25
PÁROVÁNÍ S CHYTRÝM TELEFONEM.....	26
Připojení chytrého telefonu prostřednictvím Bluetooth	26
Jak připojit sluchadlo k aplikaci.....	26
Jak vypnout připojení Bluetooth.....	26
Kompatibilita s chytrými telefony.....	27
ČIŠTĚNÍ.....	28
Nástroje.....	28
Ochrana před ušním mazem (filtr).....	29
Vysušovací pouzdro.....	29
PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	30
ŘEŠENÍ POTÍŽÍ.....	32
CESTOVÁNÍ LETADLEM.....	35
INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH.....	36
Prohlášení k nařízením FCC a ISED.....	36
Směrnice EU.....	38
Směrnice 2014/53/EU.....	38
Informace o likvidaci.....	39
SYMBOLY.....	40

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Než začnete svá sluchadla používat, důkladně si přečtěte tento návod.



Sluchadla nebo baterie mohou být nebezpečné, pokud dojde k jejich spolknutí nebo nesprávnému použití. Nesprávné použití nebo spolknutí může být příčinou vážného poranění, nebo dokonce úmrtí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékaře.



Když sluchadla nepoužíváte, vyjměte je z uší. Tak napomůžete odvětrávání zvukovodu ucha a zamezíte jeho případné infekci.



Pokud se domníváte, že se u vás rozvinula infekce ucha nebo alergická reakce, ihned kontaktujte svého ušního lékaře.



Pokud je vám sluchadlo nepohodlné nebo neseďi správně, dochází k podráždění, zarudnutí apod., obraťte se na svého odborníka na sluch.



Před sprchováním, plaváním nebo použitím fénu na vlasy sluchadla vyjměte z uší.



Nenoste sluchadla během aplikace parfému, spreje, gelu, pleťové vody nebo krému.



Nesušte sluchadlo v mikrovlnné troubě – zničilo by se.



Nikdy nepoužívejte sluchadla jiných osob a nikdy nedovolte, aby ony používaly vaše, mohlo by dojít k poškození sluchu.



Nikdy nepoužívejte sluchadla v prostředí, kde mohou být přítomny výbušné plyny, např. v dolech.



Uchovávejte sluchadla, jejich součásti, doplňky a baterie mimo dosah dětí a mentálně postižených osob.



Nikdy se nesnažte rozebrat nebo opravovat sluchadlo sami. Potřebujete-li své sluchadlo opravit, obraťte se na sluchadlového odborníka.



Vaše sluchadla obsahují radiokomunikační technologii. Vždy si prohlédněte prostředí, ve kterém je používáte. Pokud platí nějaká omezení, učinite vhodná bezpečnostní opatření.



Vaše zařízení bylo navrženo tak, aby vyhovovalo mezinárodním normám týkajícím se elektromagnetické kompatibility. Přesto však existuje možnost, že sluchadlo bude způsobovat rušení jiných elektrických zařízení. V případě, že dojde k rušení, udržujte od jiných elektrických zařízení patřičný odstup.



Mějte na paměti, že hlasitější zvuk odesílaný do vašeho sluchadla může přehlušit další důležité zvuky, jako jsou například alarmy a dopravní hluk. V takových situacích je nutné nastavit hlasitost zvuku odesílaného do vašich sluchadel na vhodnou úroveň.



Nevystavujte sluchadla extrémním teplotám ani vysoké vlhkosti. Pokud zvlhnu nebo se hodně zpotíte, rychle je vysušte.



Na čištění sluchadla nepoužívejte žádnou tekutinu ani dezinfekci.



Každý den sluchadlo po použití očistěte a zkontrolujte, zda je v pořádku. Pokud se sluchadlo během nošení rozbije a ve zvukovodu vám zůstanou malé úlomky, vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy se nepokoušejte tyto úlomky vyjmout sami.

VAŠE SLUCHADLO

Vítejte

Blahopřejeme k vašemu novému sluchadlu.

Toto sluchadlo je napájeno nabíjecí lithium-iontovou baterií a musí se nabíjet nabíječkou WPT1. Baterie je vestavěná a nelze ji svépomocí vyměnit.


Doporučujeme používat sluchadlo pravidelně, i když vám bude nějaký čas trvat, než si na ně zvyknete. Budete-li jej používat jen zřídka, s největší pravděpodobností nebudete mít ze sluchadla maximální užitek.

POZNÁMKA


Sluchadlo a jeho příslušenství nemusí vypadat přesně tak, jak znázorňují ilustrace v této brožuře. Vyhrazuji si právo provádět změny, které považujeme za nezbytné.

Základní informace o sluchadle

Sluchadlo je zobrazeno níže – na prvním obrázku – spolu s ušní sadou. Ušní sadu tvoří hadička s reproduktorem a ušní koncovka. Jde o součást sluchadla, která se zavádí do ucha.

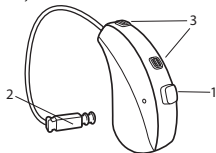

1. Tlačítko / zapnutí/vypnutí ①
2. Hadička s reproduktorem
3. Mřížka mikrofonu

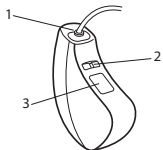

1. Připojení hadičky
2. Rozlišení pravého a levého sluchadla
3. Identifikační štítek (model a sériové číslo)

Pravé a levé sluchadlo je rozlišeno barevně. Sluchadlo pro levé ucho má modrou značku. Sluchadlo pro pravé ucho má červenou značku.

Další informace o ušní sadě naleznete v návodu k ušní sadě.

PODMÍNKY POUŽITÍ

Indikace pro použití

Sluchadla jsou určena pro jedince starší 36 měsíců s rozsahem ztráty sluchu od minimální (0 dB HL) po těžkou až velmi těžkou (115 dB HL) a pro všechny typy nedoslýchavosti.

Jsou naprogramována kvalifikovanými odborníky na léčbu sluchu (audiology, foniatry, otorinolaryngology), kteří jsou vyškoleni v léčbě sluchu.

Sluchadla s dobíjecími bateriemi


Sluchadla s dobíjecími bateriemi NESMÍ používat děti mladší 36 měsíců nebo mentálně postižené osoby.

Zamýšlené použití

Sluchadla jsou určena jako zařízení zesilující vedení zvuku vzduchem a používají se ke každodennímu poslechu v běžném prostředí. Sluchadla mohou být vybavena programem Zen, který poskytuje relaxační zvukový podklad (tj. zdroj hudby nebo šumu) pro dospělé osoby, které si přejí tento zvuk poslouchat v tichém prostředí.

Nabíjení

Doporučujeme sluchadlo každodenně dobíjet. Na tomto obrázku je znázorněna nabíječka:

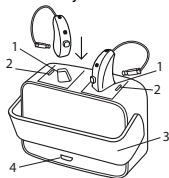


1. Nabíjecí sloty
2. Světelné indikátory
3. Sklopný kryt
4. Konektor mikro USB

Další informace ohledně nabíjení sluchadla naleznete v návodu k použití nabíječky.

Doba provozuschopnosti a délka nabíjení

Budete-li sluchadlo nabíjet po dobu půl hodiny, vystačí vám toto nabití přibližně na 4 hodiny používání sluchadla. Úplné nabití sluchadla trvá přibližně 4 hodiny.

Zcela nabité sluchadlo lze v běžném poslechovém prostředí používat po dobu nejméně 16 hodin. Potom je třeba sluchadlo opět dobít.

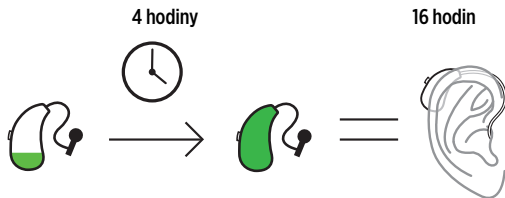

Jakmile se ozve alarm indikující nízkou úroveň nabití baterie, budete mít k dispozici ještě přibližně 3–4 hodiny běžného používání. Sluchadlo se vypne ve chvíli, kdy nabití baterie klesne na kriticky nízkou úroveň.

Ztráta sluchu, zvukové prostředí a streamování jsou faktory ovlivňující odhadovanou délku provozuschopnosti. Například používáním služby streamování se zkracuje délka provozuschopnosti sluchadla.

Podmínky provozu a nabíjení

Vaše sluchadla jsou navržena k používání v každodenních situacích a správně fungují za podmínek okolního prostředí, které jsou vám pohodlné. Sluchadla můžete používat v letadlech, ale měli byste je odložit před sprchováním, plaváním a spaním.

Provozní podmínky

	Minimální	Maximální
Teplota	0 °C (32 °F)	40 °C (104 °F)
Vlhkost	10 % (relativní)	95 % (relativní)
Atmosférický tlak	750 mbar	1060 mbar

Podmínky nabíjení

	Minimální	Maximální
Teplota	0 °C (32 °F)	30 °C (86 °F)
Vlhkost	10 % (relativní)	95 % (relativní)

Dlouhodobé skladování při nepoužívání sluchadla

V případě, že se sluchadlo chystáte nepoužívat po delší dobu, zcela ho nabijte a následně ho uložte do pouzdra, které jste obdrželi spolu se sluchadlem. Před skladováním nezapomeňte sluchadlo vypnout.

Abyste předešli neopravitelnému hlubokému vybití baterie, je zapotřebí sluchadlo v půlročních intervalech dobíjet. Hluboce vybitou baterii již nelze nabít a je nutné ji nechat vyměnit. Doporučujeme však sluchadlo dobíjet častěji než každých 6 měsíců.

Skladovací a přepravní podmínky

Sluchadlo je citlivé na extrémní podmínky, jako je třeba vysoká teplota. Nesmí se skladovat ani přepravovat na přímém slunci, ale pouze za následujících podmínek.

Skladovací podmínky

	Minimální	Maximální
Teplota	10 °C (50 °F)	40 °C (104 °F)*
Vlhkost	20 % (relativní)	80 % (relativní)

*Doporučená teplota je 10 °C až 25 °C.

Přepravní podmínky

	Minimální	Maximální
Teplota	-20 °C (-4 °F)	55 °C (131 °F)

	Minimální	Maximální
Vlhkost	10 % (relativní)	95 % (relativní)

Technické specifikace a další informace o svých sluchadlech naleznete na adrese <https://global.widex.com>.

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Vypínání a zapínání sluchadla

Sluchadlo lze zapnout dvěma způsoby:

1. Stiskněte a podržte tlačítko na několik vteřin. Po několika dalších vteřinách zazní zvukový signál, který značí, že je sluchadlo zapnuté (pokud jste se sluchadlovým odborníkem nedohodli, aby tuto funkci deaktivoval).
2. Vyjměte sluchadlo z nabíječky a po několika vteřinách se automaticky zapne. Ozve se zvukový signál indikující, že je sluchadlo zapnuté.


Sluchadlo lze vypnout dvěma způsoby:

1. Vložte sluchadlo do nabíječky, aby se začalo nabíjet.
2. Stiskněte a podržte tlačítko na několik vteřin. Zazní ukončující tón.

Nasazení a vyjmutí sluchadla



1. Přidržte spodní část hadičky a vložte ušní sadu do ucha. Můžete si pomoci tak, že zároveň zataháte za ušní boltec nahoru a dozadu.
2. Umístěte sluchadlo za ucho. Sluchadlo by mělo pohodlně spočívat na uchu a těsně přiléhat k hlavě.

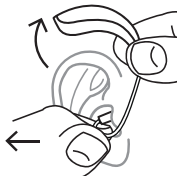

Sejměte sluchadlo zpoza ucha. Přidržte spodní část hadičky a opatrně vytáhněte ušní sadu ze zvukovodu.

Sluchadlo lze spojit s řadou různých typů ušních sad. Další informace o vaší ušní sadě naleznete v příslušné příručce.

PŘIZPŮBENÍ

Programy

Toto je přehled programů, z nichž můžete vybírat. Poradte se se sluchadlovým odborníkem.

PROGRAMY	POUŽITÍ
Univerzální	Automatický program se zaměřením na optimální zvuk ve všech situacích
PureSound	Automatický program se zaměřením na přirozený a příjemný zvuk ve všech situacích
Ticho	Speciální program pro poslech v tichém prostředí
Komfort	Speciální program pro poslech v hlučném prostředí
Automobil	Pro poslech v prostředí, kde je hlučná doprava – auta, vlaky apod.
Řeč v hluku	Použijte tento program, pokud preferujete jasný a ostrý zvuk.
Město	Pro poslech v situacích s měnící se úrovní hlasitosti (v supermarketech, hlučném pracovním prostředí apod.)

PROGRAMY	POUŽITÍ
Restaurace	Pro poslech v situacích, kdy mnoho osob mluví současně
Společnost	Použijte tento program, pokud jste na malých společenských setkáních, jako jsou např. rodinné večere.
Hudba	Pro poslech hudby
SPECIÁLNÍ PROGRAMY	POUŽITÍ
Zen	Přehrává tóny nebo ruch jako relaxační zvuk na pozadí. Další informace viz „Program Zen“.
Telefon	Tento program je určen k poslechu telefonních hovorů.
Programy + PROGRAMY	POUŽITÍ
Zen+	Tento program je podobný jako Zen, umožňuje však poslouchat různé typy tónů nebo ruchu pomocí dálkového ovládání (RC-DEX nebo aplikace).

Názvy v seznamu programů jsou výchozími názvy. Sluchadlový odborník může rovněž vybrat alternativní název programu z předvybraného seznamu. Lze tak usnadnit výběr správného programu pro poslech v každé situaci.

Podle tíže vaší nedoslýchavosti může sluchadlový odborník aktivovat funkci Rozšíření slyšitelnosti. Zeptejte se sluchadlového odborníka, zda by to pro vás mohlo být přínosné.

Pokud se vaše potřeby a preference v průběhu času změní, může sluchadlový odborník jednoduše změnit váš výběr programu.

Program Zen

Vaše sluchadlo může být vybaveno jedinečným volitelným poslechovým programem, který se nazývá Zen. Vytváří melodie (a někdy šum) na pozadí.



Budete-li mít pocit, že se snížila hlasitost nebo se zhoršila tolerance zvuků, řeč není dost jasná nebo se zhoršil ušní šelest (tinnitus), obraťte se na svého lékaře.



Program Zen může bránit ve slyšení každodenních zvuků včetně řeči. Neměli byste jej používat, když potřebujete takové zvuky slyšet. V těchto situacích přepněte sluchadlo na jiný program než Zen.

Zvukové signály

Pokud zvukové signály nepotřebujete, požádejte sluchadlového odborníka, aby je vypnul.

Zvukové signály programů

Vaše sluchadlo vydává zvuky, aby vás informovalo o programu, který jste aktivovali, nebo o změně programu. Tyto zvuky mohou být v podobě hlasových zpráv nebo tónů, a to podle toho, jak to váš sluchadlový odborník nastavil.

Program 1	Zpráva nebo jedno krátké pípnutí
Program 2	Zpráva nebo dvě krátká pípnutí
Program 3	Zpráva nebo tři krátká pípnutí
Program 4	Zpráva nebo jedno dlouhé a jedno krátké pípnutí
Program 5	Zpráva nebo jedno dlouhé a dvě krátká pípnutí

Zvukové signály tlačítka

Pamatujte, že tuto funkci může váš sluchadlový odborník deaktivovat.

Funkce tlačítka	Typ zpětné vazby	Vysvětlení zpětné vazby
Úprava hlasitosti	Tón	<ul style="list-style-type: none"> - Při dosažení výchozí úrovně hlasitosti uslyšíte dvojité pípnutí. - Při dosažení nastavení maxima nebo minima uslyšíte táhlý tón. - Při každém nastavení hlasitosti uslyšíte pípnutí.
Přepínání mezi programy	Hlasová zpráva nebo tón	V případě přepnutí do jiného programu se sluchadlo vrátí zpět do výchozího nastavení hlasitosti.

Funkce tlačítka	Typ zpětné vazby	Vysvětlení zpětné vazby
Zapínání	Hlasová zpráva nebo tón	
Vypínání	Hlasová zpráva nebo tón	

Ztráta komunikace s druhým sluchadlem

Sluchadlový odborník může zapnout ve vašem sluchadle funkci, která vás upozorní pokaždé, když dojde ke ztrátě komunikace se sluchadlem na druhém uchu. Ve svém uchu uslyšíte hlasovou zprávu.

Nastavení zvuku a programu

Aplikace MOMENT

Ke sluchadlu MOMENT lze pomocí aplikace MOMENT připojit chytrý telefon a streamovat zvuk či ovládat funkce sluchadla. Můžete si například sluchadlo jemně doladit, změnit programy a upravit či ztlumit hlasitost sluchadla.

Dálkový ovladač

Pokud máte dálkový ovladač, můžete rovněž změnit program nebo upravit zvuk ručně, abyste dosáhli většího pohodlí nebo lepší slyšitelnosti podle svých momentálních potřeb a preferencí. Další informace o fungování získáte od sluchadlového odborníka.

Tlačítko pro dvě sluchadla

Pokud máte dvě sluchadla, může váš sluchadlový odborník naprogramovat tlačítko třemi různými způsoby:

1. Jako programové tlačítko a vypínač

Funkce	Vypnuto	Zapnuto
Chcete-li změnit program, stiskněte tlačítko na levém nebo pravém sluchadle	Stiskněte a podržte tlačítko na každém sluchadle po dobu několika sekund	Stiskněte a podržte tlačítko na každém sluchadle po dobu několika sekund

2. Jako tlačítko pro nastavení zvuku a vypínač

Funkce	Vypnuto	Zapnuto
Pro lepší slyšitelnost a větší hlasitost: Stiskněte tlačítko na pravém sluchadle	Stiskněte a podržte tlačítko na pravém sluchadle po dobu několika sekund	Stiskněte a podržte tlačítko na pravém sluchadle po dobu několika sekund
Pro větší pohodlí a nižší hlasitost: Stiskněte tlačítko na levém sluchadle	Stiskněte a podržte tlačítko na levém sluchadle po dobu několika sekund	Stiskněte a podržte tlačítko na levém sluchadle po dobu několika sekund

3. Jako vyhrazený vypínač

Vypnuto	Zapnuto
Stiskněte a podržte tlačítko na každém sluchadle po dobu několika sekund	Stiskněte a podržte tlačítko na každém sluchadle po dobu několika sekund

Tlačítko pro jedno sluchadlo

Pokud máte pouze jedno sluchadlo, může váš sluchadlový odborník naprogramovat tlačítko dvěma způsoby:

1. Jako programové tlačítko a vypínač

Funkce	Vypnuto	Zapnuto
Chcete-li změnit program, stiskněte tlačítko na sluchadle	Stiskněte a podržte tlačítko na každém sluchadle po dobu několika sekund	Stiskněte a podržte tlačítko na sluchadle po dobu několika sekund

2. Jako vyhrazený vypínač

Vypnuto	Zapnuto
Stiskněte a podržte tlačítko na sluchadle po dobu několika sekund	Stiskněte a podržte tlačítko na sluchadle po dobu několika sekund

Používání chytrého telefonu se sluchadlem



Používáte-li chytrý telefon, držte jej před sebou tak, aby se mikrofon telefonu nacházel v blízkosti vašich úst. Docílíte tak nejlepšího možného zvuku během telefonního hovoru.

PÁROVÁNÍ S CHYTRÝM TELEFONEM

Připojení chytrého telefonu prostřednictvím Bluetooth

Chcete-li spárovat sluchadlo s chytrým telefonem, musíte nejprve sluchadlo restartovat. Postupujte následovně:

1. Restartujte sluchadlo.
2. Mějte sluchadlo v blízkosti telefonu a postupujte podle pokynů zobrazených v aplikaci MOMENT.
3. Sluchadlo i chytrý telefon jsou nyní připraveny k použití.

POZNÁMKA

Sluchadlo se nachází v režimu párování pouze po dobu tří minut od svého restartování. Pokud ho nespárujete včas, bude pravděpodobně nutné ho opět restartovat.

Jak připojit sluchadlo k aplikaci

Po spárování sluchadla s chytrým telefonem (v nabídce nastavení) otevřete aplikaci MOMENT, aby se automaticky připojila ke sluchadlu.

Jak vypnout připojení Bluetooth

Chcete-li vypnout připojení Bluetooth, přejděte v aplikaci MOMENT do nabídky Další a vyberte možnost „Bluetooth sluchadla“. Po restartování sluchadla dojde k opětovnému připojení pomocí Bluetooth.

Kompatibilita s chytrými telefony

Seznam kompatibilních chytrých telefonů, tabletů apod. naleznete na následující webové stránce:

<https://global.widex.com>.

ČIŠTĚNÍ

Budete-li své sluchadlo čistit každý den, bude fungovat efektivněji a jeho nošení bude příjemnější.



Sluchadlo otřete měkkým a suchým hadříkem.

Pokud jsou otvory mikrofonu ucpané, obraťte se na sluchadlového odborníka.


Pokud si v mikrofonech všimnete nahromaděného prachu či nečistot, jemně je vyfoukejte nebo setřete měkkým hadříkem.

Pokud sluchadlo zvlhne nebo se hodně zpotíte, ihned ho vysušte.

Informace o čištění ušní sady naleznete v návodu k ušní sadě.

Nástroje

Spolu se sluchadlem dostanete následující čisticí nástroje:

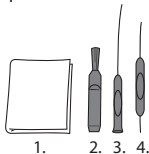

1. Hadřík
2. Kartáček na ušní sadu
3. Dlouhý nástroj k odstraňování ušního mazu
4. Krátký nástroj k odstraňování ušního mazu

Ochrana před ušním mazem (filtr)

Ochrana před ušním mazem je filtr umístěný v otvoru reproduktoru za koncovkou a pomáhá chránit reproduktor před ušním mazem. Vždy používejte ochranu přes ušním mazem dodávanou společností Widex.

Informace o výměně ochrany před ušním mazem naleznete v návodu k ušní sadě.

Vysušovací pouzdro

Vysušovací pouzdro WIDEX slouží k vysušování sluchadla i ušní sady, čímž předchází vzniku poruch způsobených vlhkostí.

Provozní doba: 45 minut

Maximální teplota: 40 °C (104 °F)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke sluchadlu můžete používat řadu příslušenství. Abyste zjistili, jaké příslušenství byste mohli využívat, zeptejte se sluchadlového odborníka.

Název	Použití
RC-DEX	dálkový ovladač
TV-DEX	pro poslech TV a audio
PHONE-DEX 2*	pro snadné použití pevné telefonní linky
FM+DEX	pro příjem audio a FM signálů
COM-DEX	pro bezdrátové připojení k mobilním telefonům a jiným zařízením prostřednictvím rozhraní Bluetooth
COM-DEX Remote Mic	ulehčuje uživatelům sluchadel rozumět řeči v obtížných poslechových situacích
TV PLAY**	pro přímé televizní vysílání (streamování)
WPT1	nabíječka pro sluchadlo MRR2D
APLIKACE MO-MENT	pro ovládání sluchadel pomocí chytrého telefonu

* Dostupné pouze v některých zemích.

** K dispozici s WIDEX MOMENT™, kompatibilita koncem roku 2020.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Tyto stránky obsahují rady, jak řešit situace, když sluchadlo přestane fungovat nebo nefunguje dle očekávání. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého sluchadlového odborníka.

Problém	Možná příčina	Řešení
Sluchadlo nereaguje.	Není zapnuté.	Zapněte sluchadlo stisknutím tlačítka nebo je umístěte na 10 vteřin do nabíječky.
	Sluchadlo není nabito.	Nabijte sluchadlo v nabíječce.
Sluchadlo je naprosto tiiché, a to i během nabíjení a v zapnutém stavu.	Ochrana před ušním mazem je ucpana ušním mazem.	Sejměte z hadičky koncovku. Pokud se v ochraně před ušním mazem nahromadil ušní maz, vyměňte ji. Další informace naleznete v návodu k ušní sadě. Můžete se také poradit se sluchadlovým odborníkem.
Sluchadlo není dostatečně hlasité.	Ucho je ucpané ušním mazem.	Obraťte se na svého lékaře.

Problém	Možná příčina	Řešení
	Ochrana před ušním mazem je ucpaná ušním mazem.	Sejměte z hadičky koncovku. Pokud se v ochraně před ušním mazem nahromadil ušní maz, vyměňte ji. Další informace naleznete v návodu k ušní sadě. Můžete se také poradit se sluchadlovým odborníkem.
	Mohlo dojít ke změně sluchu.	Obraťte se na svého sluchadlového odborníka / svého lékaře.
Ze sluchadla se ozývá nepřetržitě pískání.	Ucho je ucpané ušním mazem.	Obraťte se na svého lékaře.
	Ušní sada není umístěna správně.	Viz „Nasazení a sejmutí sluchadla“.
Vaše dvě sluchadla nepracují synchronně.	Došlo ke ztrátě spojení mezi sluchadly.	Vypněte je a znovu zapněte.
Obě sluchadla nereagují odpovídající změnou hlasitosti nebo programu na příslušenství.	Příslušenství je používáno mimo přenosový rozsah.	Posuňte příslušenství blíže ke sluchadlům.

Problém	Možná příčina	Řešení
	Silné elektromagnetické rušení.	Přesuňte se dál od známého zdroje elektromagnetického rušení.
	Příslušenství a sluchadla nejsou spárována.	Ověřte u sluchadlového odborníka, zda je příslušenství spárováno se sluchadly.

POZNÁMKA

Tyto informace se vztahují pouze ke sluchadlu. Informace vztahující se k vaší ušní sadě naleznete v uživatelské příručce „Ušní sady pro sluchadla Widex“. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého sluchadlového odborníka.

CESTOVÁNÍ LETADLEM

Sluchadlo i nabíječku lze přepravovat jak v příručním, tak i v odbaveném zavazadle.

Připojení Bluetooth na sluchadle je třeba pomocí aplikace vypnout. Pokud se sluchadlo nepřipojí k mobilnímu telefonu, nehrozí riziko přenosu signálu z rádiového vysílače 2,4 GHz.

INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPÍSECH

Prohlášení k nařízením FCC a ISED

FCC ID: TTY-MRR2D

IC: 5676B-MRR2D

Prohlášení komise FCC (Federal Communications Commission)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or tele-

vision reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Wi-dex could void the user's authority to operate the equipment.

Prohlášení ISED / Déclaration d'ISED

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISED RADIATION EXPOSURE STATEMENT:

This equipment complies with ISED RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED EXPOSITION AUX RADIATIONS:

Cet équipement est conforme avec ISED les limites d'exposition aux rayonnements définies pour un contrôlé environnement. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

Směrnice EU

Směrnice 2014/53/EU

Společnost Widex A/S tímto prohlašuje, že tento MRR2D je v souladu se základními požadavky a dalšími relevantními ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

MRR2D obsahuje rádiové vysílače pracující na: 10,6 MHz, -54 dB μ A/m při vzdálenosti 10 m, 2,4 GHz, 0,9 mW EIRP.

Kopie dokumentu „Prohlášení o shodě“ podle směrnice 2014/53/EU je dostupná na adrese:

<https://global.widex.com/doc>

Aby se předešlo možnému zhoršení rádiového výkonu, mělo by se zařízení nacházet ve vzdálenosti alespoň 25 cm od ostatních radiokomunikačních zařízení.



N26346

Informace o likvidaci

Sluchadla, příslušenství a nabíječka se nesmí vyhazovat do běžného komunálního odpadu.

Sluchadla a jejich příslušenství a nabíječku je nutné odevzdat na místo určené k likvidaci elektrických a elektronických zařízení nebo vrátit prodejci sluchadel za účelem bezpečné likvidace.

SYMBOLY

Symbole běžně užívané společností Wixed A/S při označování zdravotnických prostředků (štítky/návody/atd.)

Symbol **Název/Popis**



Výrobce

Název a adresa výrobce produktu jsou uvedeny u symbolu. V případě potřeby může být také uvedeno datum výroby.



Katalogové číslo

Katalogové číslo (číslo položky) produktu.



Přečtěte si návod k použití

Návod k použití obsahuje důležitá upozornění (varování / bezpečnostní opatření) a je nutné si jej před použitím produktu prostudovat.



Varování

Text označený symbolem varování je nutné před použitím produktu prostudovat.



Značka WEEE

„Nevyhazovat do komunálního odpadu“. Je-li výrobek nutné zlikvidovat, musí být odeslán na určené sběrné místo k recyklaci a obnově, aby se zabránilo riziku znečištění životního prostředí nebo poškození lidského zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek.



Značka CE

Produkt vyhovuje požadavkům uvedeným v evropských směrnících, které se týkají označení CE.

Symbol	Název/Popis
---------------	--------------------



	Značka RCM
--	-------------------

	Produkt vyhovuje požadavkům předpisů o elektrické bezpečnosti, elektromagnetické kompatibilitě a rádiovém spektru, jež platí pro produkty dodávané na australský a novozélandský trh.
--	---



	Zapnutí/vypnutí
--	------------------------

	Označení připojení nebo odpojení od zdroje napájení.
--	--

Widex PRAHA

Bohušovická 230/12

190 00 Praha 9

Tel: 286 580 396

servis@widex.cz

Widex BRNO

Hlinky 995/70

603 00 Brno

Tel: 543 331 630

brno@widex.cz

www.widex.cz

Widex OSTRAVA

Biskupská 3330/8

702 00 Ostrava

Tel: 597 317 597

ostrava@widex.cz

**WIDEX A/S**

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø, Dánsko

<https://global.widex.com> **0123****Návod č.:**

9 514 0552 020 02

Vydáno:

2020-06

