

OVERSIGT OVER HØREAPPARATERNES FUNKTIONALITETER OG EGENSKABER

		TRÅDLØS								
		DREAM440	DREAM330	DREAM220	DREAM110	CLEAR440	CLEAR330	CLEAR220	SUPER440	SUPER220
HØRBARHED I ROLIGE OMGIVELSER										
InterEar TruSound kompression	Med InterEar TruSound kompression, som understøtter lokalisering af lyde i komplekse omgivelser	Ja				Ja			Ja	
Lydstabilisatorer	Den adaptive kompression i TruSound systemet giver optimal lyd kvalitet og sikrer, at tale altid kan høres i skiftende lyttesituationer	Ja	Ja	Ja	Basis	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
TruSound AOC	Sikrer forvrængningsfri lyd, selv når høreapparatet tilpasses tæt ved tilpasningsgrænsen eller skal levere kraftige outputlyde	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
TruSound Softener	Bevarer komfort ved impulslyde uanset inputniveau ved at tage toppen af effekt/impulslyde	Ja	Ja			Ja	Ja		Ja	
Digital Pinna	Hjælper med at lokalisere og fokusere naturligt på stemme forfra eller bagfra ved at imitere den normale pinnaeffekt	Ja	Ja			Ja	Ja		Ja	
EDRC - Enhanced Dynamic Range Compression	Giver hørbarehed af svage lyde, taleforståelighed og komfort i støjende omgivelser	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulige tilpasningsrationaler	WFR: Widex tilpasningsrationaler; NAL: NAL-NL2; DSL: DSL v5.0a	WFR/NAL	WFR/NAL	WFR/NAL	WFR/NAL	WFR/DSL	WFR/DSL	WFR/DSL	WFR/DSL	WFR/DSL
HØRBARHED I STØJENDE OMGIVELSER										
True-Input teknologi	Fremragende taleforståelighed og lyd kvalitet i enhver situation takket være et udvidet inputområde på op til 113 dB SPL	Ja	Ja	Ja	Ja					
High Definition Locator (automatisk adaptiv retningsbestemmelse)	Giver bedre taleforståelighed i støj med kanalspecifik retningskarakteristik for talefremhævelse	15 kanaler	10 kanaler	5 kanaler	Bredbånd	15 kanaler	10 kanaler	5 kanaler	15 kanaler	5 kanaler
Speech Enhancer SII	InterEar (IE) sikrer talefremhævelse af den dominerende stemme i en menneskemængde for at give taleforståelighed i komplekse omgivelser	InterEar	Ja			InterEar	Ja		InterEar	
Støjreduktion SIS	Giver lyttekomfort ved at reducere støj og forstærke tale	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FreeFocus (via M-DEX)	Giver brugeren mulighed for at vælge mellem fokus på tale fra venstre eller højre side eller bagfra	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bagudrettet fokus-program	Vælg at lytte til bagfra kommende tale	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
BRUGERKOMFORT										
Multi-Directional Active Feedback Cancelling	Minimering af hyl, forbedret identificering og eliminering af feedback	InterEar	InterEar	InterEar	Ja	InterEar	InterEar	InterEar	InterEar	InterEar
TruSound Softener	Bevarer komfort ved pludselige lyde uanset inputniveau ved at tage toppen af effekt/impulslyde	Ja	Ja			Ja	Ja		Ja	
TruSound AOC	Sikrer forvrængningsfri lyd, selv når høreapparatet tilpasses tæt ved tilpasningsgrænsen eller leverer kraftige outputlyde	Ja	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hammer Detector	Detekterer og minimerer uønskede kraftige impulslyde	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vindstøjkontrol	Reduktion af vindstøj	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
BRUGERSTYREDE KONTROLLER										
Lytteprogrammer	Et bredere udvalg af programmer, som giver flere lyttesituationer	5	4	3	2	5	4	3	5	3
InterEar lydstyrke/programskift	Skift lydstyrke/program i begge høreapparater samtidig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Telefon+	Hør telefonopkald i begge høreapparater, når de bruger WidexLink til overførsel af lyd	Ja	Ja			Ja	Ja		Ja	Ja
SmartSpeak/SmartTone	Stemme- eller tonebeskeder giver nem håndtering af høreapparater	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Personlig Zen	Fleksibel støj- eller lydtilstil, som er justerbar i overensstemmelse med den ønskede frekvens	Ja								
Zen/Zen+	Et tinnitusbehandlingsværktøj til reduktion af generne ved tinnitus ved hjælp af beroligende toner og/eller støj, ekstra programmer med Zen+	InterEar	InterEar	InterEar	Ja	InterEar/ja	InterEar/ja	Tilvalg	InterEar/ja	Tilvalg
HØRBARHED AF HØJE FREKVENSER										
Personlig Audibility Extender	Højfrekvente lyde er hørbare i alle lyttesituationer og programmer ved hjælp af lineær frekvenstransponering	Ja	Ja	Ja	Ja					
Audibility Extender	Højfrekvente lyde er hørbare i ét lytteprogram ved hjælp af lineær frekvenstransponering					Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
TILPASNING OG FINJUSTERING										
Signalbehandlingskanaler	Giver nøjagtig tilpasning samt en mere præcis lydoplevelse og taleforståelighed	15	10	5	3	15	10	5	15	5
Tilpasningsfrekvenskanaler	Antal justerbare frekvensbånd	15	10	5	4	15	10	5	15	5
Udvidet Sensogram	Start tilpasningen mere nøjagtigt ved at bruge in situ-tærskler for præcisionstilpasning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lyddagbog/Datalogging	Giver mulighed for nem overvågning af brugerdata og høreapparatbrug - inklusive karakteristik for lyttemiljøer og programvalg	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
DEX-ENHEDER, CROS-LØSNINGER OG FJERNBETJENINGER										
RC-DEX	Kompakt fjernbetjening til programskift og lydstyrkejustering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
M-DEX	Giver bedre høreelse på mobiltelefon eller andet Bluetooth-kompatibelt udstyr	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UNI-DEX	En nem plug-&-play mobiltelefonløsning, der bæres om halsen. Streamer lyd fra alle former for udstyr med en minijack-udgang	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
TV-DEX	Forbedret tv-lyd uden ekko eller forsinkelse	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
PHONE-DEX	Problemfri høreelse med denne fastnettelefon	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
FM+DEX	3 funktioner: FM, telespole og audioindgang	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
T-DEX	En prismæssigt overkommelig og nem løsning til at forbinde høreapparater med mobiltelefoner. Forbindelse via telespole.	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
TRÅDLØS CROS	Trådløs enhed til ensidig døvhed, anvender WidexLink	Ja	Ja	Ja	Ja					

* = SmartTone er inkluderet. SmartSpeak er et tilvalg.

PRODUKT- OVERSIGT



HØREAPPARATMODELLER



PRODUKTSERIE	DREAM													CLEAR								SUPER					
Model	PASSION		FUSION				m CB	FASHION	FASHION POWER	9	XP	CIC	CIC MICRO	PASSION		FUSION			m	m-CB	9	XP	CIC	CIC-TR	VS/VSD		
Modeltype	RIC		RIC / RITE				Micro BTE	Standard BTE	Standard BTE	Standard BTE	ITE/ITC	CIC	CIC MICRO	RIC		RIC / RITE			Micro BTE	Micro BTE	Standard BTE	ITE/ITC	CIC	CIC	RIC/RITE Power		
Højttaler	S-højttaler	M-højttaler	S-højttaler	M-højttaler	P-højttaler	HP-højttaler								S-højttaler	M-højttaler	M-højttaler	P-højttaler	HP-højttaler							P-højttaler	SP-højttaler	
Mulighed for åben tilpasning (BTE/RIC)	Ja	Ja	Ja	Ja			Ja	Ja		Ja				Ja	Ja	Ja			Ja	Ja	Ja						
Slangetype							Tynd/klassisk	Tynd/klassisk	Klassisk	Tynd/klassisk									Tynd/klassisk	Tynd/klassisk	Tynd/klassisk						
Batteristørrelse	10	10	312	312	312	312	10	312	13	13	312	10	10	10	10	312	312	312	10	10	13	312	10	10	675	675	
Batterilevetid	90 timer	90 timer	150 timer	155 timer	145 timer	145 timer	90 timer	150 timer	265 timer	300 timer	135 timer	100 timer	100 timer	80 timer	75 timer	125 timer	120 timer	120 timer	85 timer	75 timer	240 timer	140 timer	90 timer	90 timer	515 timer	375 timer	
Beskyttelse mod støv og vejrbestandighed (IP57)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	
BRUGERSTYREDE KONTROLLER																											
Volumenkontrol	kun via DEX	kun via DEX	kun via DEX	kun via DEX	kun via DEX	kun via DEX	kun via DEX	Ja	Ja	Ja	kun via DEX	kun via DEX		kun via DEX	kun via DEX	kun via DEX	kun via DEX	kun via DEX	Ja	kun via DEX	kun via DEX	kun via DEX	kun via DEX	Ja	Ja	Ja	Ja
Programskift	kun via DEX	kun via DEX	Ja	Ja	Ja	Ja	kun via DEX	Ja	Ja	Ja	kun via DEX	kun via DEX		kun via DEX	kun via DEX	Ja	Ja	Ja	kun via DEX	kun via DEX	Ja	kun via DEX	kun via DEX	Ja	Ja	Ja	Ja
Telespole	kun via M-DEX eller FM+DEX	kun via M-DEX eller FM+DEX	Ja	Ja	Ja	Ja	kun via M-DEX eller FM+DEX	Ja	Ja	Ja	Valgfri	kun via M-DEX eller FM+DEX		kun via M-DEX eller FM+DEX	kun via M-DEX eller FM+DEX	Ja	Ja	Ja	kun via M-DEX eller FM+DEX	kun via M-DEX eller FM+DEX	Ja	Valgfri	kun via M-DEX eller FM+DEX	kun via M-DEX eller FM+DEX	Ja	Ja	
TILBEHØR																											
Kompatibel med DEX-enhed	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle		Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle
Fjernbetjening (valgfri)	DEX	DEX	DEX	DEX	DEX	DEX	DEX	DEX	DEX	DEX	DEX	DEX		DEX	DEX	DEX	DEX	DEX	DEX	DEX	DEX	DEX	DEX	DEX	DEX	DEX	DEX
CROS (Contralateral Routing of Signals)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja													Wired (VSD)	Wired (VSD)	
DAI-kompatibel	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	Ja	via FM+DEX	via FM+DEX		via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	Ja	via FM+DEX	via FM+DEX	via FM+DEX	Ja (VSD)	Ja (VSD)	
TEKNIKE DETALJER																											
Max forstærkning/MPO (dB/dB SPL)*	62/120	70/125	64/118	71/124	73/133	83/137	64/127	75/137	75/138	68/131	67/129	op til 64/124	op til 64/124	64/118	71/123	71/122	69/130	83/137	67/130	65/127	64/132	66/125	63/124	59/119	72/132	87/143	
Båndbredde (Hz)	100-10000	100-9200	100-10000	100-10000	100-8550	100-7600	100-10000	100-7700	100-6250	100-8000	100-9450	100-10000	100-10000	100-10000	100-9600	100-9600	100-9000	100-7800	100-8300	100-10000	100-7500	100-9500	100-9900	100-10000	100-9400	100-7400	
Tilpasningsområde (dB)	0-80	0-90	0-80	0-90	40-110	50-115	0-85	0-95	40-110	0-90	0-85	op til 90 dB	op til 90 dB	0-80	0-80	0-90	40-110	50-115	0-85	0-85	0-90	0-85	0-80	0-80	40-110	50-120	
TILPASNING OG PROGRAMMERING																											
COMPASS GPS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja														
COMPASS V5														Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
USB Link	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	med WLC	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
NOAHlink med nEARcom	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	med WLC	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
NOAHlink eller HI-PRO																											

*IEC 60118-0 topværdier

DEX ENHEDER OG FJERNBETJENINGER



UNI-DEX M-DEX TV-DEX FM-DEX




RC-DEX RC4 T-DEX PHONE-DEX



DRY-GO UV

HØREAPPARATFARVER

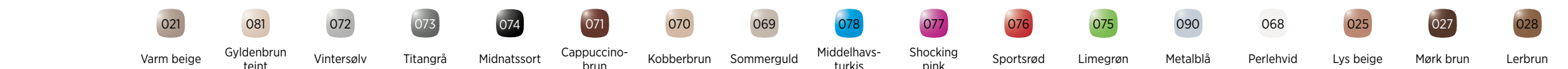

DREAM	021	081	072	073	074	071	070	069	078	077	076	075	090	068	025	027	028
PASSION	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			
FUSION	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			
FASHION	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			
FASHION POWER	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			
m CB	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja										
9	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja											
XP/CIC/CIC MICRO															Ja	Ja	Ja
CLEAR																	
PASSION	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			
FUSION	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			
m/m CB	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja											
9	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja											
XP/CIC/CIC-TR															Ja	Ja	Ja
SUPER																	
SUPER	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja											

Vil du vide mere om Widex' produkter? Besøg vores website til professionelle på www.da.widex.pro. Se den nyeste version af produktoversigten her: widex.pro/product-overview

WIDEX APPARATER PÅ AMGROS LICITATION 2014

KATEGORI	MODEL	HØREAPPARAT
D1	CIC	MENU10-CIC
	ITC	CLEAR330 C3-XP
	ITE	CLEAR330 C3-XP
	BTE/RITE	CLEAR330 FS-M
	BTE m/tynd slange	CLEAR330 C3-9
	BTE m/øreprop	CLEAR330-C3-9
Vandtæt 1	BTE m/tynd slange	CLEAR330 C3-m-élan
	BTE m/øreprop	DREAM440 D4-m-tyk
Vandtæt 3	BTE m/øreprop	DREAM330 D3-FA
DEX	RC-DEX	
	M-DEX	

WIDEX, DREAM, WIDEX CLEAR og DEX er varemærker registreret af Widex A/S.



Trykt af KLS/2015-02 9 502 3751 010 #01



Widex Danmark A/S
Nymøllevej 6, 3540 Lyngby
Bestil online på eshop.widex.pro
eller via e-mail på ordre@widex.dk
www.da.widex.pro