

## WIDEX BEYOND™ RIC 440/330/220/110



BEYOND は、U-プラットフォーム搭載のiPhone 対応補聴器です。2.4 GHz Bluetooth 接続によるスマホやタブレットからの直接ストリーミングおよび補聴器操作が可能、BEYOND Zは充電池対応です。\*


サウンド クラスにより、変化する音環境に最適な処理が自動的に切替えられます。

スマホ上のBEYOND 専用アプリは、個人の使い方に合わせてカスタマイズ可能です。

空気電池 PR41(312) 使用  
防塵防水性能 IP68

軽度から高度難聴適応

### 推奨フィッティングレンジ

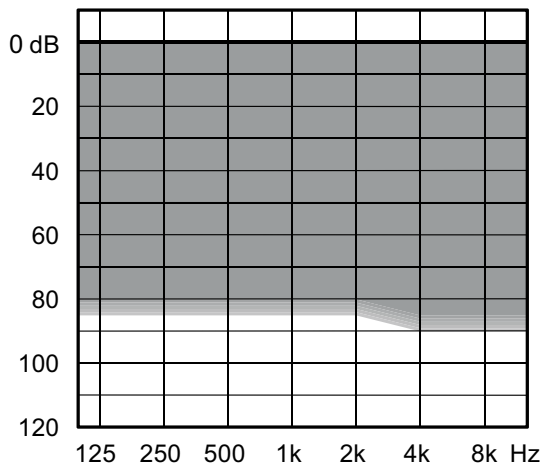

### 基本機能

- U-プラットフォームとスマホへのダイレクト通信
- インターイヤー (IE:両耳協調機能)
- 様々なイヤチップに対応
- パワーセイバーIII :低消費電流

主な特長	440	330	220	110
性能	ooooo	oooo	ooo	oo
処理チャンネル数	15	10	6	4

### ワイヤレス通信接続性\*\*\*

ワイヤレス通信接続性***	440	330	220	110
ダイレクトストリーミング	•	•	•	•
アプリ (スマホによる直接操作、音質調整) *	•	•	•	•
アプリ (iPhoneまたはAndroid、COM-DEX経由)	•	•	•	•
テレコイル	•	•	•	•

### BEYOND/ BEYOND Z 機能


機能	440	330	220	110
Uプラットフォーム	•	•	•	•
高音域強調	•	•	•	•
プッシュボタン**	U	U	U	U
風雑音 減衰	U	•	•	•
フォーカスモード	•	•	•	前のみ
デジタルピナ	•	•	•	•
ソフトレベル 騒音抑制	•	•	•	•
トゥルーサウンドソフトナー	•	•	•	•
スピーチ エンハンサー-RT	U/IE	IE	•	•
騒音制御	•	•	•	•
サウンド クラス	9 (IE)	5 (IE)	3	1
HD ロケーター	15	10	6	広帯域
プログラム数	5	4	3	3
処理・調整チャンネル数	15	10	6	4
ゼン	IE	IE	IE	•
オーディビリティ エクステンダー-AE	U	U	U	U
変速コンプレッション	U/IE	U/IE	U/IE	U

\*\*設定可能: 優先コントロール、プログラム切替、両者の組合せ


\*\*\*DEX機器にも対応: CALL-DEX, TV-DEX, COM DEX, UNI-DEX, RC-DEX, FM+ DEX

\* WIDEX BEYOND is compatible with the following devices or newer: iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4th generation), iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini with Retina display, iPod touch 6th generation using iOS 9.0 or later. Apple, the Apple logo, iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S and other countries. Android, Google Play and Google Play logo are trademarks of Google Inc.


最大音響利得 (入力音圧 50dB SPL)

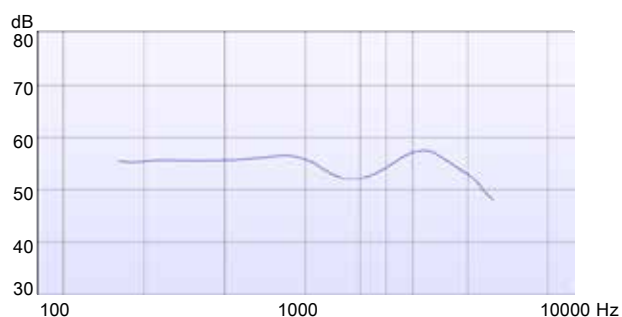


最大出力音圧\* (入力音圧 90dB SPL)

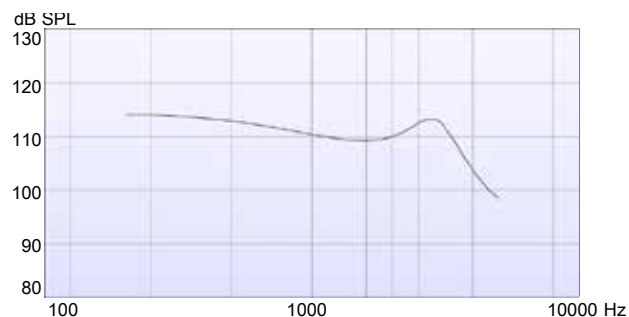

規準周波数特性\* (入力音圧 60dB SPL)

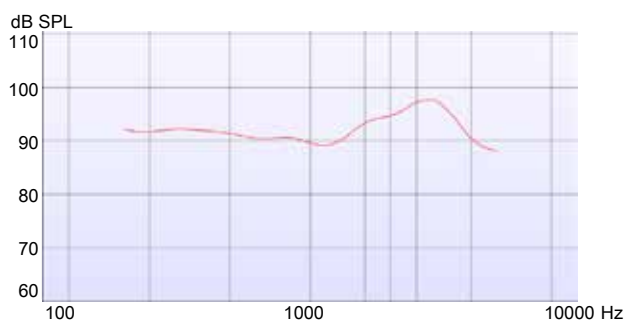

誘導コイル特性\* (磁界の強さ 31.6mA/m)

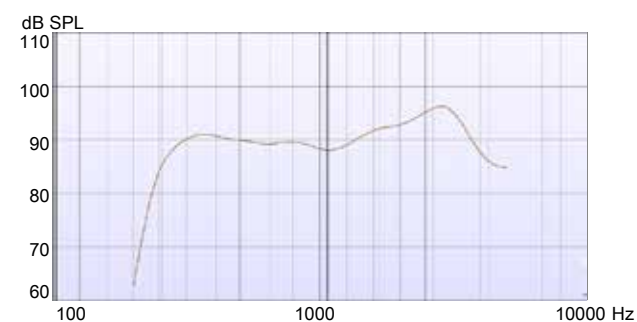

JIS C 5512:2015 (2cmカプラで測定) による公称値

		B-F2-M	
電池の種類		PR41 1.4V	
90dB入力最大出力音圧レベル	HFA	111	dB SPL
	ピーク	115	dB SPL
最大音響利得	HFA	56	dB
	ピーク	58	dB
規準利得	HFA	34	dB
周波数範囲		100-7000 Hz	
等価入力雑音レベル		23	dB SPL
電池の電流		1	mA
全高調波ひずみ	500Hz	2	%
	800Hz	2	%
	1600Hz	2	%
試験用ループに対する等価感度		92	dB
誘導コイル入力の最大感度		83	dB

製造業者の名称：ワイデックス株式会社  
 131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田セントラルタワー  
 TEL: 0120-332-604