

WIDEX BEYOND™ RITE 440/330/220/110



BEYOND は、U-プラットフォーム搭載のiPhone 対応補聴器です。2.4 GHz Bluetooth 接続によるスマホやタブレットからの直接ストリーミングおよび補聴器操作が可能、BEYOND Zは充電電池対応です。*


サウンド クラスにより、変化する音環境に最適な処理が自動的に切替えられます。

スマホ上のBEYOND 専用アプリは、個人の使い方に合わせてカスタマイズ可能です。

空気電池 PR41(312) 使用
防塵防水性能 IP68

中度から重度難聴適応

推奨フィッティングレンジ

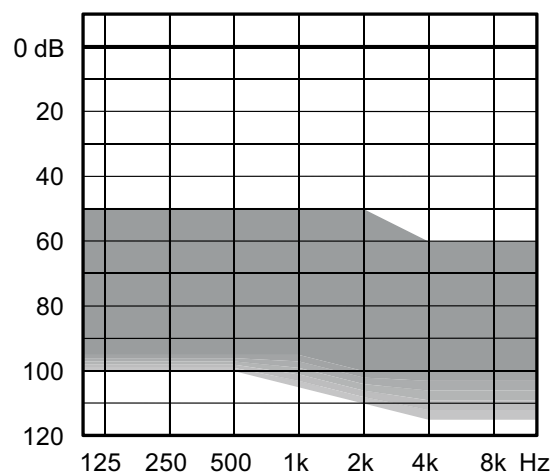

基本機能

- ・ U-プラットフォームとスマホへのダイレクト通信
- ・ インターイヤー (IE:両耳協調機能)
- ・ 様々なイヤチップに対応
- ・ パワーセイバーIII :低消費電流

主な特長	440	330	220	110
性能	00000	0000	000	00
処理チャンネル数	15	10	6	4

ワイヤレス通信接続性***

機能	440	330	220	110
ダイレクトストリーミング	・	・	・	・
アプリ (スマホによる直接操作、音質調整) *	・	・	・	・
アプリ (iPhoneまたはAndroid、COM-DEX経由)	・	・	・	・
テレコイル	・	・	・	・

BEYOND 機能


機能	440	330	220	110
Uプラットフォーム	・	・	・	・
高音域強調	・	・	・	・
プッシュボタン**	U	U	U	U
風雑音減衰	U			
フォーカスモード	・	・	・	前のみ
デジタルピナ	・	・		
ソフトレベル騒音抑制	・	・	・	・
トウルーサウンドソフトナー	・	・	・	
スピーチ エンハンサーRT	U/IE	IE		
騒音制御	・	・	・	・
サウンドクラス	9 (IE)	5 (IE)	3	1
HD ロケーター	15	10	6	広帯域
プログラム数	5	4	3	3
処理・調整チャンネル数	15	10	6	4
ゼン	IE	IE	IE	・
オーディビリティ エクステンダーAE	U	U	U	U
変速コンプレッション	U/IE	U/IE	U/IE	U

**設定可能: 優先コントロール、プログラム切替、両者の組合せ


***DEX機器にも対応: CALL-DEX, TV-DEX, COM-DEX, UNI-DEX, RC-DEX, FM+ DEX

* WIDEX BEYOND is compatible with the following devices or newer: iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4th generation), iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini with Retina display, iPod touch 6th generation using iOS 9.0 or later. Apple, the Apple logo, iPhone, iPad and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S and other countries. Android, Google Play and Google Play logo are trademarks of Google Inc.


最大音響利得 (入力音圧 50dB SPL)

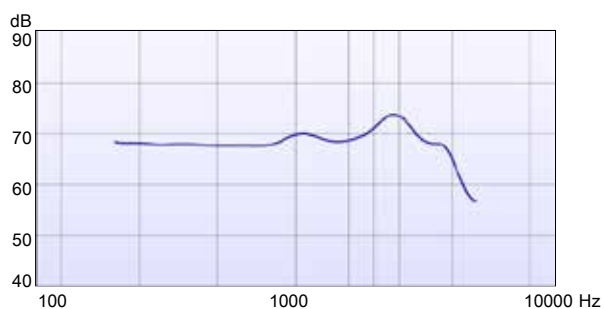


最大出力音圧* (入力音圧 90dB SPL)

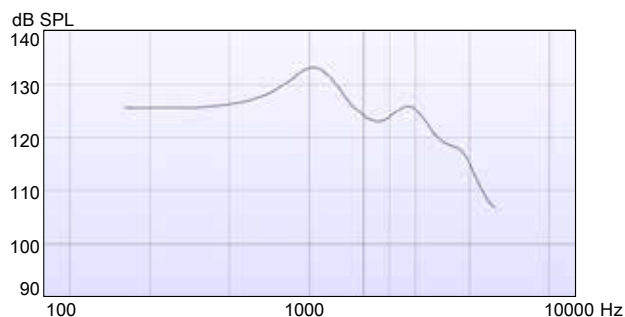

準周波数特性* (入力音圧 60dB SPL)

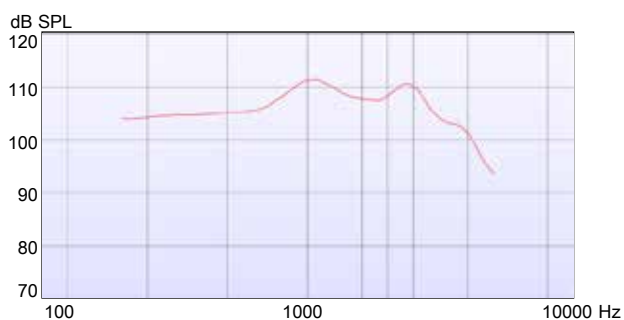

誘導コイル特性* (磁界の強さ 31.6mA/m)

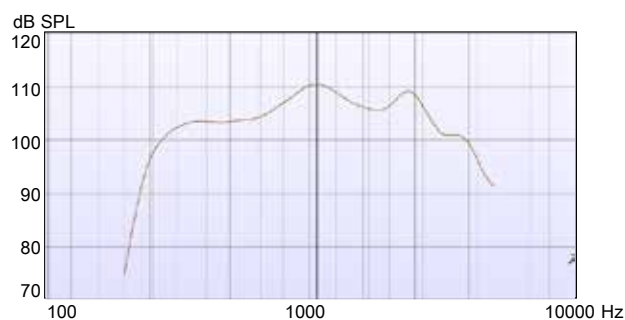

JIS C 5512:2015 (2cmカプラで測定) による公称値

		B-F2-HP	
電池の種類		PR41 1.4V	
90dB入力最大出力音圧レベル	HFA	128	dB SPL
	ピーク	134	dB SPL
最大音響利得	HFA	71	dB
	ピーク	75	dB
規準利得	HFA	52	dB
周波数範囲		100-5800 Hz	
等価入力雑音レベル		20	dB SPL
電池の電流		1	mA
全高調波ひずみ	500Hz	2	%
	800Hz	2	%
	1600Hz	2	%
試験用ループに対する等価感度		109	dB
誘導コイル入力の最大感度		99	dB

カスタムハードイヤモールド (拡張音口) 使用時

製造業者の名称：ワイデックス株式会社

131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田セントラルタワー

TEL: 0120-332-604