


WIDEX EVOKE™ BTE WITH SOUNDSENSE TECHNOLOGY



WIDEX BTE は、WIDEX E プラットフォームをベースにしており、従来に比べさらに正確かつ迅速に自動処理を行うフリュイドサウンドコントローラを搭載しています。WIDEX BTE は、サウンドセンスアダプトを使用しユーザーの傾向を学ぶことで、より優れたパーソナライズされたサウンドに導く初の補聴器です。

- WidexLink テクノロジーと TONELINK アプリを経由する複数のワイヤレス接続
- DEX 補助援助装置との互換性
- 4つの性能レベル 440/330/220/110
- 優先コントロール、プログラムボタンおよびテレコイルは標準
- PR41 電池を使用
- 保護等級 IP68
- 軽度から高度/重度の聴力損失まで対応。

推奨されるフィッティングレンジ

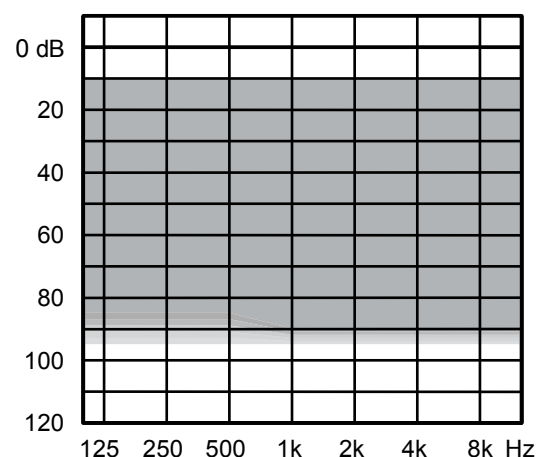

標準技術

- フリュイドサウンドコントローラ付き E プラットフォーム
- 改良されたオープンフィット Widex の処方式
- 順応機能
- 低消費電流を実現するパワーセイバー IV テクノロジー

主な特長	440	330	220	110
性能	xxxxxx	xxxxx	xxxx	xx
処理・調整チャンネル数	15	12	10	6

接続

WidexLink - DEX 補聴援助装置*	・	・	・	・
テレコイル	・	・	・	・

iOS および Android 向けアプリ

TONELINK アプリ	・	・	・	・
COM-DEX アプリ	・	・	・	・

機能


順応マネージャー	・	・	・	・
フリュイドサウンドアナライザー (サウンドクラス)	11 (IE)	7 (IE)	4	3
プログラム	5	4	3	3
スマートウィンドマネージャー	・			
高音域強調	・			
スピーチエンハンサー RT	RT/IE	IE		
デジタルピナ	・	・		
HD ロケーター	・	・	・	・
トゥルーサウンドソフトナー	・	・	・	
サウンドセンスアダプトによる優先コントロール	・	・	・	
ソフトレベル騒音抑制	・	・	・	・
騒音制御	・	・	・	・
ZEN IE	・	・	・	・
オーディビリティエクステンダー	・	・	・	・

* 以下の補聴援助機器 DEX も含まれます：CALL-DEX / TV-DEX / COM DEX / UNI-DEX / RC-DEX / FM+ DEX


最大音響利得（入力音圧 50dB SPL）



最大出力音圧（入力音圧 90dB SPL）

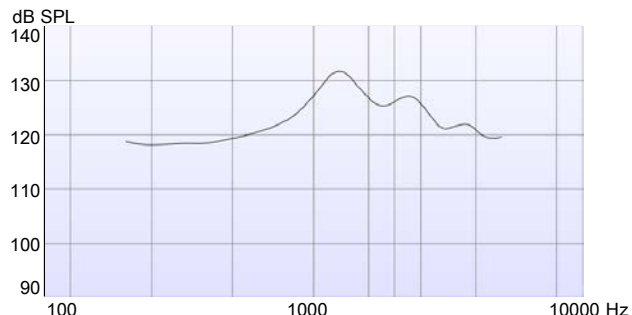

規準周波数特性（入力音圧 60dB SPL）

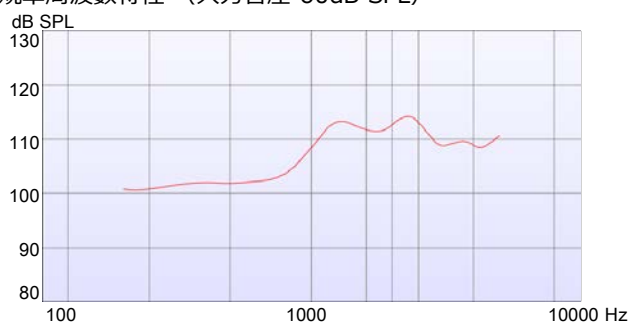

誘導コイル入力 特性（磁界の強さ 31.6mA/m）

JIS C 5512:2015（2cm³カプラで測定）による公称値

		E-FA	
電池の種類		PR41 1.4V	
90dB入力最大出力音圧レベル	HFA	126	dB SPL
	ピーク	133	dB SPL
最大音響利得	HFA	59	dB
	ピーク	65	dB
規準利得	HFA	49	dB
周波数範囲		100-6600	Hz
等価入力雑音レベル		20	dB SPL
電池の電流		1	mA
全高調波ひずみ	500Hz	5	%
	800Hz	4	%
	1600Hz	3	%
試験用ループに対する等価感度		110	dB
誘導コイル入力の最大感度		89	dB

製造業者の名称：ワイデックス株式会社

131-0034 東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田セントラルタワー

TEL: 0120-332-604